




UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 11112 Masážne kreslo inSPORTline Adamys

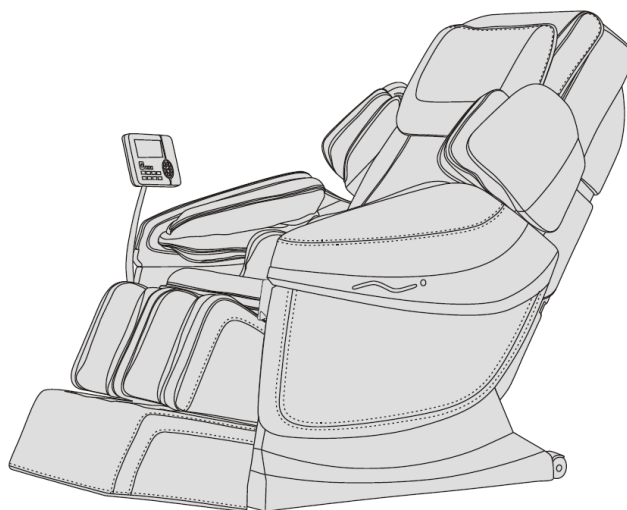

OBSAH

BEZPEČNOST A ÚDRŽBA	3
KOMPONENTY	5
FUNKČNÁ VÝBAVA	5
OVLÁDANIE	6
INŠTALÁCIA.....	10
ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU.....	17
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	17
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	17

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Prečítajte si celý manuál, aby ste boli schopný masážne kreslo správne používať. Dbajte na dodržiavanie bezpečnostných pokynov. Po prečítaní si manuál uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

POZNÁMKA: Naša spoločnosť si vyhradzuje právo aktualizovať vzhľad a charakteristiku výrobku bez povinnosti predchádzajúceho upozornenia. Farebné prevedenie závisí na aktuálnom modeli masážneho kresla.

BEZPEČNOSŤ A ÚDRŽBA

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- Zabráňte deťom kontaktu s pohyblivými časťami kresla.
- Pre napájanie tohto prístroja použite zodpovedajúci elektrický zdroj s riadnym uzemnením.
- Z bezpečnostných dôvodov a pre ochranu kresla odpojte po každom použití a pred čistením napájací kábel z elektrickej siete.
- Kreslo používajte iba tak, ako je popísané v manuáli.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Kreslo používajte iba v interiéri.
- Pred použitím si prečítajte riadne tento manuál.
- Používanie kresla spôsobom, ktorý nie je uvedený v tomto manuáli, je zakázané.
- Odporúčaná dĺžka masáže: 20 minút.
- Kreslo nepoužívajte, ak došlo k poškodeniu či popraskaniu kože.
- Kreslo nepoužívajte, ak došlo k poškodeniu krycieho materiálu či iných častí.
- Kreslo nepoužívajte, pokiaľ je vetrací otvor upchatý alebo je zamedzené správne vetranie.
- Na kreslo nekladte žiadne predmety.
- Počas používania kresla nezaspiť.
- Kreslo nepoužívajte po požití alkoholu či iných omamných látok.
- Po konzumácii jedla nepoužívajte kreslo skôr ako za hodinu.
- Nevoľte príliš vysokú intenzitu masáže, aby nedošlo k vzniku zranenia.
- Umiestnite na rovný, čistý a suchý povrch. Zachovajte okolo celého zariadenia bezpečnostný odstup od iných objektov aspoň 0,6 m.
- **Max. záťaž:** 150 kg

UMIESTNENIE MASÁŽNEHO KRESLA

- Nepoužívajte kreslo pri vysokej okolitej teplote a vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni).
- Nepoužívajte kreslo bezprostredne po zmene okolitej teploty.
- Kreslo nepoužívajte v prašnom či akokoľvek nepriaznivom prostredí.
- Okolo kresla je potrebné zabezpečiť dostatočný voľný priestor pre vetranie.

KRESLO BY NEMALI POUŽÍVAŤ

- Ľudia trpiaci osteoporózou.
- Ľudia trpiaci srdcovým ochorením alebo ľudia s elektronickými implantátmi (napr. kardiostimulátorom).
- Ľudia so zvýšenou telesnou teplotou.
- Tehotné ženy a ženy v období menštruácie.

- Osoby trpiace poúrazovými stavmi.
- Ľudia s kožnými problémami.
- Deti mladšie ako 14 rokov alebo osoby s mentálnym postihnutím.
- Ľudia, ktorí majú od lekára odporúčaný kľudový režim alebo sa necítia dobre.
- Ľudia s mokrou kožou po sprchovaní, cvičení apod.
- Povrch kresla je vyhrievaný, preto musia ľudia citliví na vysokú teplotu dbať na zvýšenú opatrnosť.

BEZPEČNOSŤ

- Uistite sa, že má elektrický zdroj vhodné napätie.
- Nezapájajte napájací kábel mokrými rukami.
- Do kresla sa nesmie dostať voda, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom či poškodeniu výrobku.
- Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu káblov a neupravujte elektrický obvod kresla.
- Na čistenie elektrických častí ako je vypínač a zástrčka nepoužívajte vlhkú handru.
- Pri prerušení prísunu elektrickej energie dbajte mimoriadnej opatrnosti, aby pri opätovnom zapnutí elektrického obvodu nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Ak kreslo nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na servisné centrum.
- Ak sa počas masáže necítite dobre, prestaňte kreslo používať a poraďte sa s lekárom.



ÚDRŽBA

- Údržbu vždy zverte kvalifikovanému servisnému technikovi. Kreslo nerozoberajte ani inak nezasahujte do jeho konštrukcie.
- Po použití odpojte prístroj od elektrickej siete.
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený napájací kábel alebo elektrická zásuvka.
- Pred dlhodobým skladovaním zmotajte kabeláž a uskladnite kreslo v suchom, čistom prostredí.
- Nevystavujte kreslo vysokým teplotám, neumiestňujte ho do blízkosti ohňa a chráňte ho pred dlhodobým pôsobením priameho slnečného žiarenia.
- Kreslo čistite suchou handričkou. Na čistenie nepoužívajte riedidlo, benzín ani alkohol.
- Vďaka kvalitnému spracovaniu nevyžadujú mechanické časti kresla žiadnu mimoriadnu údržbu.
- Chráňte kreslo pred kontaktom s ostrými predmetmi.
- Neposúvajte kreslo po nerovnom povrchu. Pri presúvaní kreslo vždy nadvihnite a preneste.
- Pri prevádzke kresla robte prestávky. Nenechávajte kreslo spustené príliš dlho.

BEŽNÉ PORUCHY A ICH RIEŠENIA

- Je prirodzené, že pri prevádzke prístroja budete počuť chod motora.
- Ak kreslo nefunguje, skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel a sieťový vypínač zapnutý.
- Masáž sa automaticky ukončí pri dosiahnutí nastaveného časového intervalu. Prístroj sa tiež automaticky vypne, ak pobeží príliš dlho a začne sa prehrievať. V tomto prípade nechajte prístroj pred opätovným spustením aspoň pol hodiny vychladnúť.

KOMPONENTY

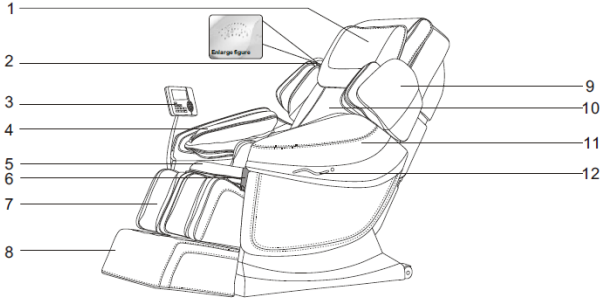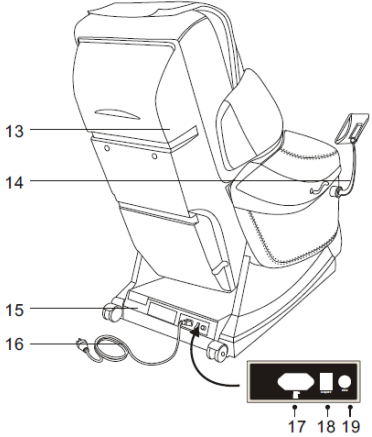
	
1. Čalúnená opierka hlavy 2. Reproduktor 3. Ovládač 4. Vzduchové vankúšiky v oblasti predlaktia 5. Čalúnená sedacia časť 6. Vrecko na mobilný telefón 7. Lýtkové opory 8. Podpera chodidiel 9. Opora paží 10. Chrbtové čalúnenie	11. Opora predlaktia 12. Dekoratívne LED osvetlenie 13. Zadný kryt 14. Držiak ovládača 15. Základňa 16. Napájací kábel 17. Zdieľka pre napájací kábel 18. Sieťový vypínač 19. Poistková skriňa

FUNKČNÁ VÝBAVA

- Prístroj je vybavený vertikálne sa pohybujúcim 3D masážnym mechanizmom so 4 masážnymi kolieskami.
- Ramenná oblasť je vybavená funkciou pre automatickú detekciu masážnych bodov a presné nastavenie masážnych hlavíc. Pre zaistenie maximálneho komfortu a efektivity poskytuje tento mechanizmus automatické nastavenie vzdialenosti medzi masážnymi hlavícami podľa tvaru tela a detegovaných masážnych bodov.
- Masážne funkcie: komfortná masáž, relaxačná masáž, úľava od bolesti, kompletná vzduchová masáž, uvoľnenie strednej časti tela.
- Pamäť na 3 masáže režimy.
- Manuálne nastavenie masáže hornej polovice tela, masáž nastaviteľná v 3 režimoch - komplexná, lokálna a bodová. 6 typov masáže: zvieranie, hnetenie, plieskanie, shiatsu, hnetenie so súčasným plieskaním, 3D masáž. Intenzita masáže nastaviteľná v 5 rýchlostiach. Vzdialenosť medzi masážnymi hlavícami je nastaviteľná v 5 úrovniach.
- Funkcia pre masáž horných končatín (26 vzduchových vankúšikov), masáž paží (4 vzduchové vankúšiky) - intenzita je nastaviteľná v 3 stupňoch.
- Masáž dolnej polovice tela: 4 vzduchové vankúšiky v chrbtovej oblasti, 5 vzduchových vankúšikov v oblasti zadku, 40 vzduchových vankúšikov v oblasti dolných končatín - intenzita je nastaviteľná v 3 stupňoch.
- Funkcia pre prehrávanie MP3 z mobilného telefónu. Vstavaný reproduktor.

- Funkcia pre vyhrievanie chrbtovej oblasti - ako zdroj infračerveného vyhrievania je použité karbónové vlákno.
- Funkcia pre vyhrievanie oblasti kolien - ako zdroj infračerveného vyhrievania je použité karbónové vlákno.
- Regulovateľné nožné podpery pre nastavenie výšky užívateľa.
- Automatická detekcia posedu - po vypnutí kresla dochádza k automatickému návratu masážnych hlavíc späť do východiskovej pozície.
- VFD displej.
- Dekoratívny LED indikátor na opore predlaktí.



OVLÁDANIE

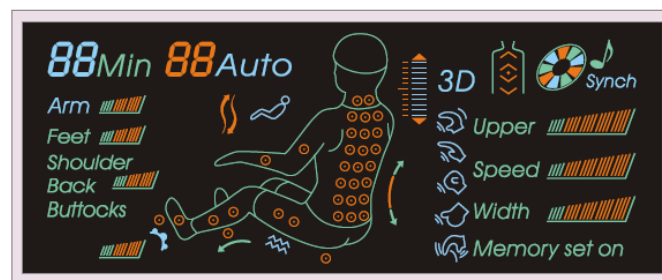

POZNÁMKA: Ilustračný obrázok.




1. ZAPOJENIE

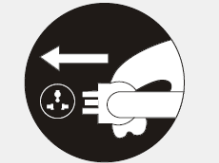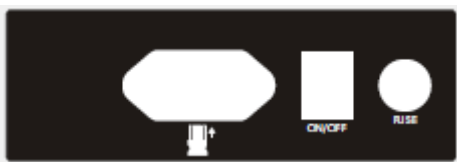 Zapojenie napájacieho kábla.	 Umiestnenie sieťového vypínača (ON/OFF)
---	---

2. ZAPNUTIE MASÁŽE

- Pre aktiváciu masážneho režimu stlačte červené tlačidlo. Kreslo sa automaticky nakloní do masážnej polohy.
- Prebehne automatická detekcia polohy ramien a masážnych bodov.
- Po skončení automatickej detekcie sa ozve zvuková signalizácia. V tejto fáze môžete prispôsobiť vertikálne nastavenie hlavíc v oblasti ramien. Po 10 sekundách od nastavenia polohy masážnych hlavíc sa automaticky spustí masáž.

Posunutie masážnych hlavíc hore.		
Posunutie masážnych hlavíc dole.		

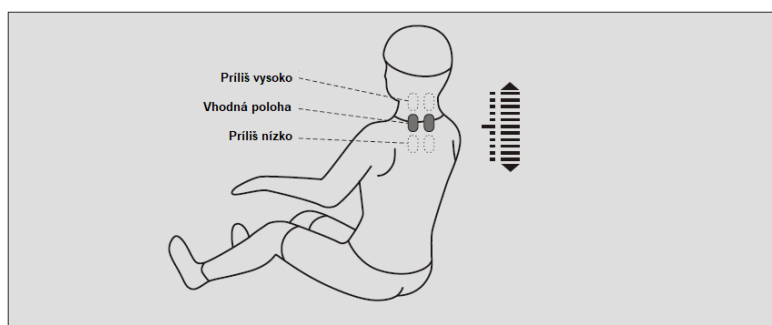

- Zvoľte typ masáže.
- Pre výber prednastaveného režimu použite tlačidlá A, B alebo C.

	Pamäťové tlačidlá
---	-------------------

• Nastavenie dĺžky masáže


	Odporúčaná dĺžka masáže: 20 minút. Maximálna dĺžka masáže: 40 minút. Jednotka nastavenia: 5 minút. Po prekročení maximálnej dĺžky 40 minút sa jednotka začne počítať od začiatku.
---	---

• Automatická masáž


	Uvoľnenie pohybového aparátu.	F1 Auto
---	-------------------------------	----------------



	Rozprúdenie krvného obehu.	F2 Auto
	Úľava od bolesti: hlboká masáž zameraná na redukciu bolesti.	F3 Auto
	Komplexná vzduchová masáž. Súčasná masáž oblasti pásu, zadku, rúk a nôh.	F4 Auto
	Pretiahnutie strednej časti tela: Najskôr sa aktivujú vzduchové vankúšiky v lýtkových opierkach a chrbtová opierka sa sklopí nadol. Následne sa budú lýtkové opierky opakovane pohybovať hore a dole a preťahovať tak strednú časť tela. Aktivovaný je tiež masážny mechanizmus a vzduchové vankúšiky v sedacej časti.	F5 Auto

• **Manuálne funkcie**

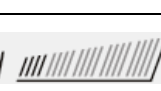Tlačidlo	Charakteristika	Zobrazenie
	Zvieranie v oblasti ramien: 1 režim, nastaviteľná rýchlosť a sila masážnych hlavíc.	 (H1)
	Súčasné miesenie a plieskanie: 1 režim, nastaviteľná rýchlosť a sila masážnych hlavíc.	 (H1)
	Miesenie: 1 režim, nastaviteľná rýchlosť a sila masážnych hlavíc.	 (H1)
	Plieskanie: 2 režimy, nastaviteľná rýchlosť, rozteč a sila masážnych hlavíc.	 (H1–H2)
	Shiatsu: 2 režimy, nastaviteľná rýchlosť, rozteč a sila masážnych hlavíc.	 (H1–H2)
	3D: 4 režimy: nastaviteľná rýchlosť a sila masážnych hlavíc.	3D (H1–H4)
	Rýchlosť: nastavenie v 5 stupňoch	Speed 
	Rozteč hlavíc: nastavenie v 5 stupňoch (v režimoch  a )	Width 

• **Vzduchová masáž**

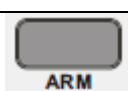Tlačidlo	Charakteristika	Zobrazenie
	Tlačidlo pre vzduchovú masáž v oblasti paží.	Arm 
	Tlačidlo pre nastavenie intenzity masáže v 3 úrovniach.	Arm 

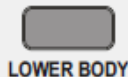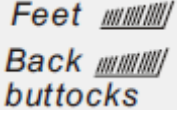	Tlačidlo pre vzduchovú masáž spodnej polovice tela (masáž spodnej polovice tela, chrbta, pásu a lýtok).	
	Tlačidlo pre nastavenie intenzity masáže v 3 úrovniach.	

	Pretiahnutie lýtok: funkcia aktívna v režime vzduchovej masáže spodnej polovice tela a masáže lýtok.
---	--

• **Ďalšie manuálne funkcie**

Tlačidlo	Charakteristika	Zobrazenie
	Tlačidlo pre zníženie intenzity masáže v oblasti hornej polovice tela.	
	Tlačidlo pre zvýšenie intenzity masáže v oblasti hornej polovice tela.	

	Masáž chodidiel nastaviteľná v 3 úrovniach.	
	Aktivácia vyhrievania v oblasti chrbta a kolien. Vyhrievanie je plne aktivované po 3 minútach od aktivácie.	

3. SKLON OPORY CHRBTU A LÝTOK

Tlačidlo	Charakteristika	Zobrazenie
	Tlačidlo pre automatické sklopenie kresla.	

	Tlačidlo pre zdvihnutie lýtkovej opory - opora sa pomaly dvíha, kým držíte tlačidlo.
	Tlačidlo pre zníženie lýtkovej opory - opora pomaly klesá, kým držíte tlačidlo.


	Tlačidlo pre zdvihnutie chrbtovej opierky - opora sa pomaly dvíha, kým držíte tlačidlo.
	Tlačidlo pre zníženie chrbtovej opierky - opora pomaly klesá, kým držíte tlačidlo.

	Tlačidlo pre súčasné zdvihnutie chrbtovej opierky a zníženie lýtkových opôr. Pre zmenu polohy tlačidlo pridrži.
---	---

	Tlačidlo pre súčasné sklopenie chrbtovej opierky a zdvihnutie lýtkových opôr. Pre zmenu polohy tlačidlo pridržite.
---	--

4. ĎALŠIE FUNKCIE

- Prehrávanie hudby z mobilného telefónu: kreslo je vybavené vreckom pre mobilný telefón a systémom pre prehrávanie hudby.
- 3D reproduktory na horných oporách umožňujú maximálny zážitok pri počúvaní hudby.
- Postranný dekoratívny LED indikátor: automatické prepínanie medzi červenou, zelenou, modrou, modrozelenou, fialovou, žltou a bielou farbou.

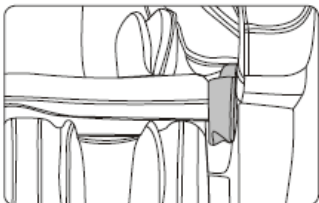
		
Vrecko na mobilný telefón (audio rozhranie)	3D reproduktory	Dekoratívny LED indikátor

5. VYPNUTIE/ZASTAVENIE MASÁŽE

- Pre zastavenie masáže, ukončenie všetkých masážnych funkcií a automatický návrat opôr chrbta a nôh do východiskovej polohy stlačte červené tlačidlo. Masážny režim sa takisto ukončí po vypršaní vopred nastaveného časového intervalu (v tomto prípade nedochádza k automatickému návratu opôr do východiskovej polohy).
- Po ukončení masáže sa na displeji zobrazí hlásenie "Memory Set On" upozorňujúca užívateľa na možnosť uloženia masážneho režimu do pamäte pod jedným z tlačidiel A, B alebo C. Opätovným stlačením červeného tlačidla prístroj vypnete a masážne hlavice sa vrátia do východiskovej polohy. K automatickému vypnutiu kresla a obnovenie východiskovej polohy masážnych hlavíc dochádza po 10 sekundách nečinnosti.



- Odpojenie zo siete.

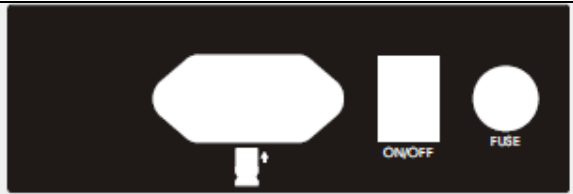
	
Sieťový vypínač ON/OFF	Odpojenie napájacieho kábla

INŠTALÁCIA


1. Inštalácia opierok predlaktia

- Prevlečte káble a vzduchovú trubicu vedúcu k opore predlaktia otvorom v ráme kresla (Obr. 1).

- Dbajte na správnu orientáciu konektorov (Obr. 2).

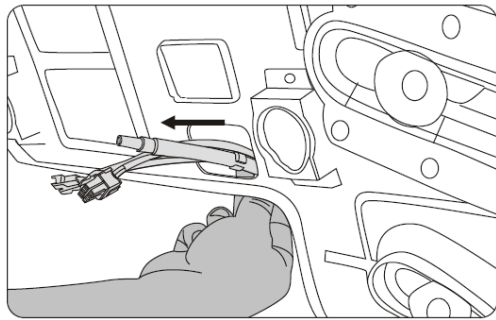


Obr. 1

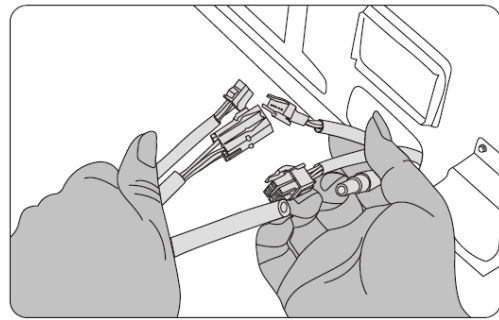


Obr. 2

- Po riadnom pripojení konektorov (Obr. 3) zasuňte opatrne káble a vzduchovú trubicu do rámu kresla (Obr. 4). Dávajte pozor, aby ste nepricvikli vzduchovú trubicu.

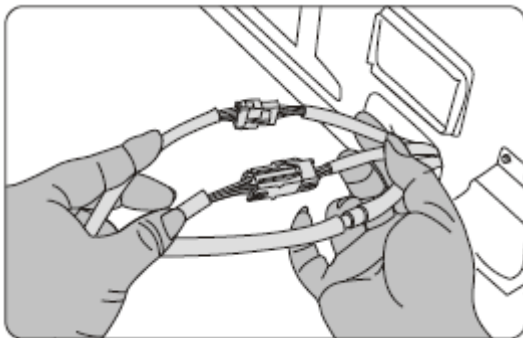


Obr. 3

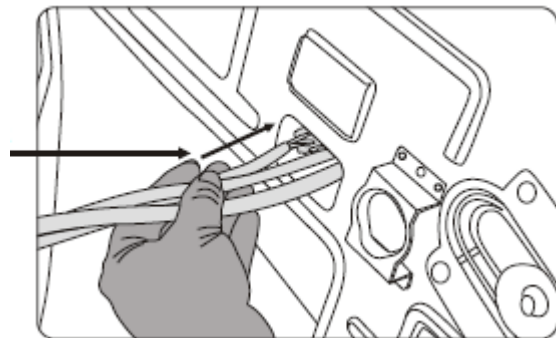


Obr. 4

- Kolíky na opierke musia dosadať na zásuvky vo fixačnej doske - oceľová doska je usporiadaná dizajnu opory (Obr. 5).
- Uchopte pevne oporu predlaktia a napasujte ju na rám (dávajte pozor, aby ste nepricvikli kabeláž a trubicu). Uistite sa, že opora zakrýva celý rám a riadne dolieha vo všetkých kontaktných bodoch (Obr. 6).

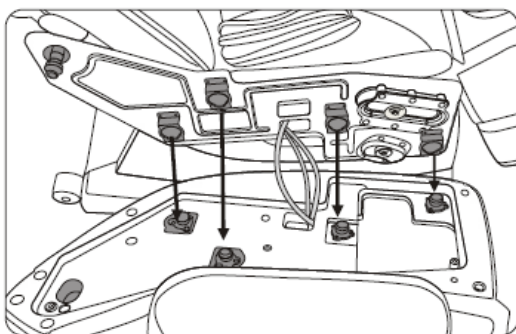

Obr. 5

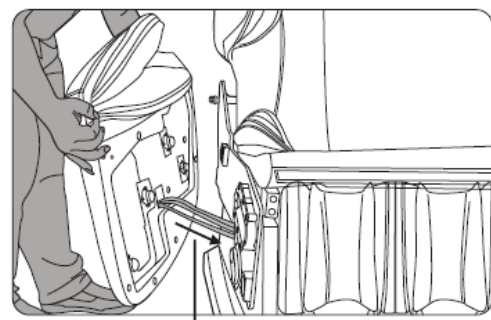


Obr. 6

Poznámka: Dbajte na správne vedenie kabeláže a trubice.

- Po nasadení opory predlaktia na oceľový rám skúste na oporu zatlačiť, aby ste sa uistili, že je riadne zaistená (Obr. 7).
- Lokalizujte montážny otvor v prednej časti kovového rámu a upevnite spojovací materiál pomocou maticového kľúča (Obr. 8).


- Lokalizujte montážny otvor na zadnej strane kovového rámu a upevnite spojovací materiál pomocou maticového kľúča (Obr. 9).

Rovnakým spôsobom upevnite aj druhú oporu predlaktia.

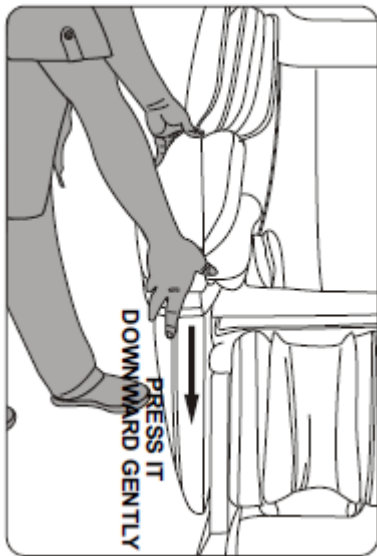


Obr. 7

Poznámka: Zatlačte zhora na oporu.

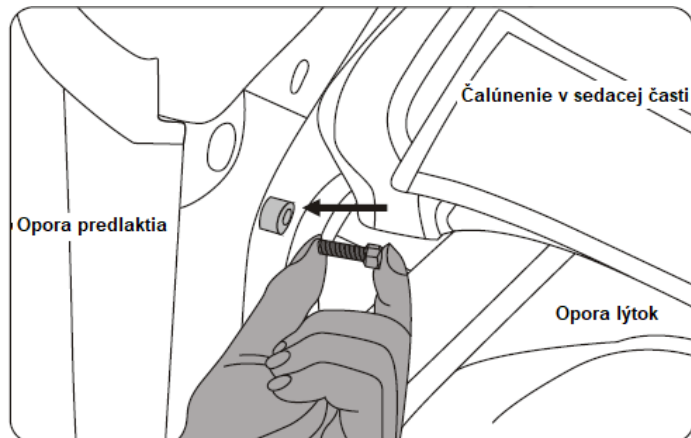

Obr. 8

Poznámka: Predný montážny otvor

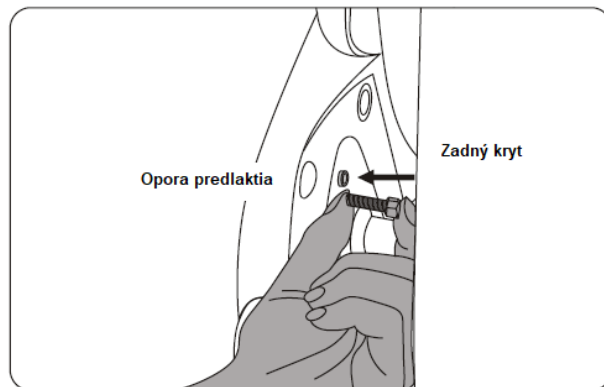


Obr. 9


Zadný montážny otvor

2. Inštalácia opory paží

- Vzduchovú trubicu a kábel prevlečte otvorom v opore paží a nasadte oporu paží tak, aby kolík opory zapadol do otvoru v ráme (Obr. 1).
- Pritlačte oporu na rám a zaistite ju pomocou dvoch krížových skrutiek (Obr. 2).

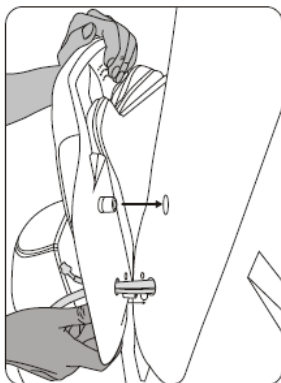


Obr. 1

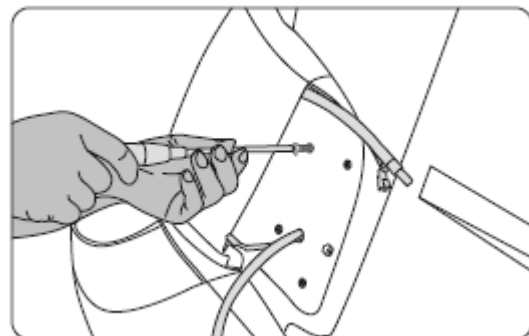


Obr. 2

- Zapojte kábel a vzduchovú trubicu a uistite sa, že v mieste spoja nedochádza k úniku vzduchu (Obr. 3).
- Dávajte pozor, aby nedošlo k priškripeniu kábla a trubice - kábel a trubicu umiestnite tak, ako je znázornené na Obr. 4.

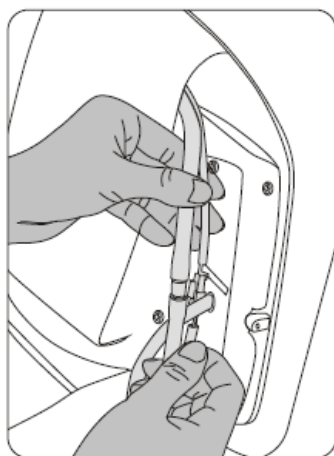


Obr. 3

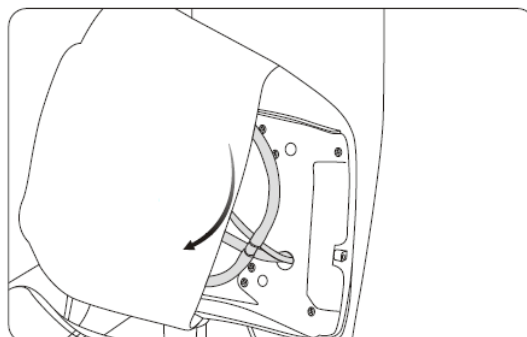


Obr. 4

- Zasuňte výstuž do vrečka na opierke, zatlačte ju smerom dovnútra a opatrne napasujte (Obr. 5).
- Upevnite výstuž pomocou krížovej skrutky (Obr. 6).

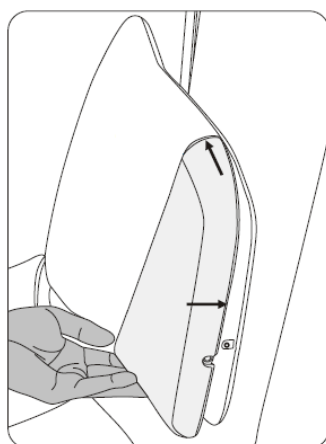


Obr. 5

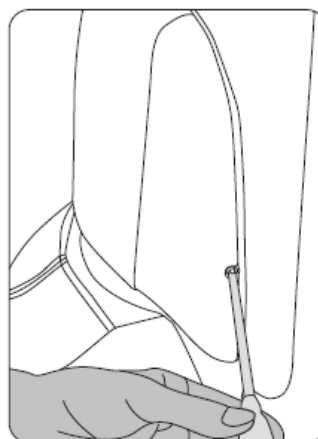


Obr. 6

3. Montáž ovládacieho panela


1. Upínač
2. Upínacia skrutka
3. Držiak
4. Fixačná objímka

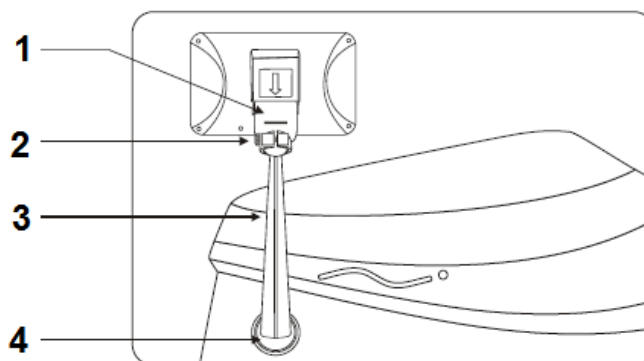

- Najskôr vyskrutkujte upínaciu skrutku (Obr. 1).
- Nasadte objímku upínača na držiak (Obr. 2).

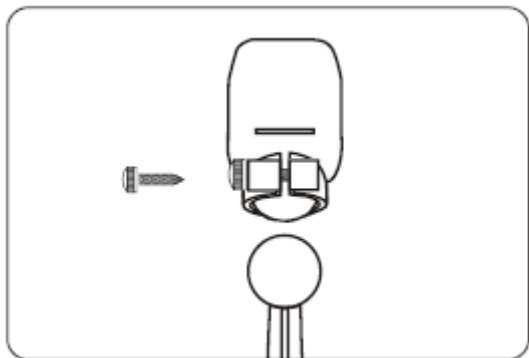


Obr. 1

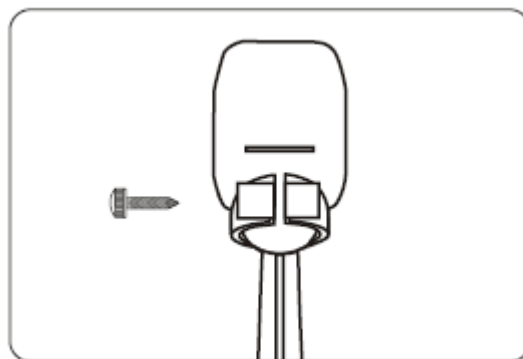


Obr. 2

- Zaskrutkujte upínaciu skrutku - dávajte pozor na jej správnu orientáciu (Obr. 3).
- Pripravte si montážnu objímku (Obr. 4).

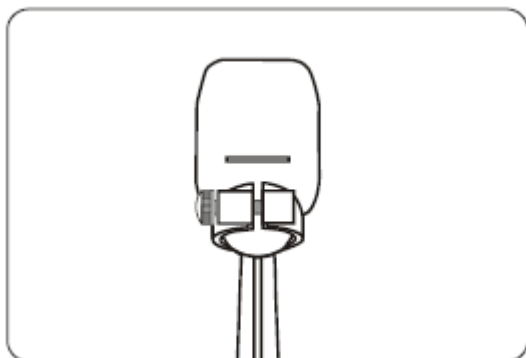


Obr. 3

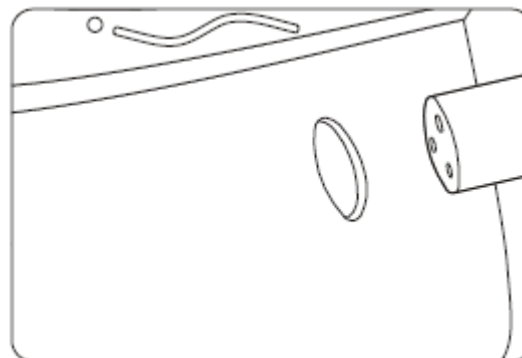


Obr. 4

- Umiestnite montážnu objímku do otvoru na pravej bočnej opore - dbajte na správne umiestnenie vodiacej drážky v objímke (Obr. 5).
- Zaskrutkujte skrutky fixujúce objímku (Obr. 6).

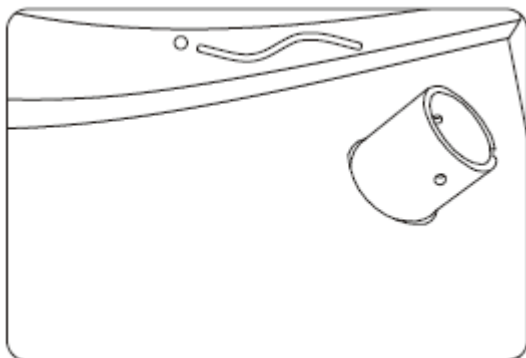


Obr. 5

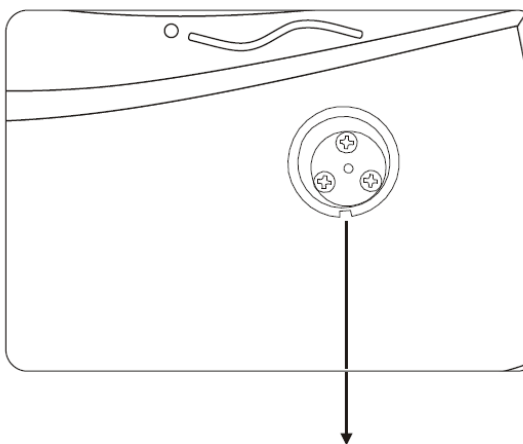


Obr. 6

Poznámka: Drážka musí smerovať kolmo k zemi.

- Pripravte sa na montáž držiaku (Obr. 7).
- Nasadte držiak na montážnu objímku - dbajte, aby na seba doliehali vodiace drážky (Obr. 8).

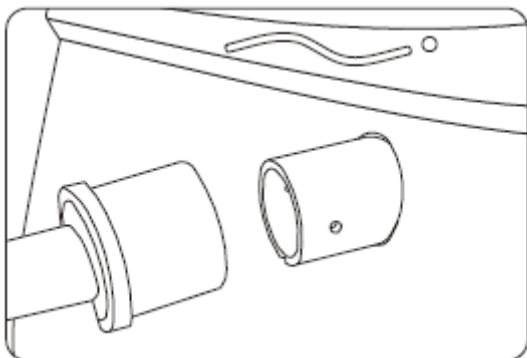


Obr. 7

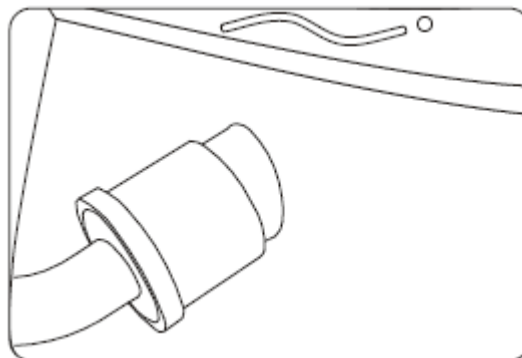


Obr. 8

Poznámka: Drážka musí smerovať kolmo k zemi.

- Pripravte si dve postranné skrutky držiaka (Obr. 9).
- Uťahnutím skrutiek montáž dokončíte (Obr. 10).

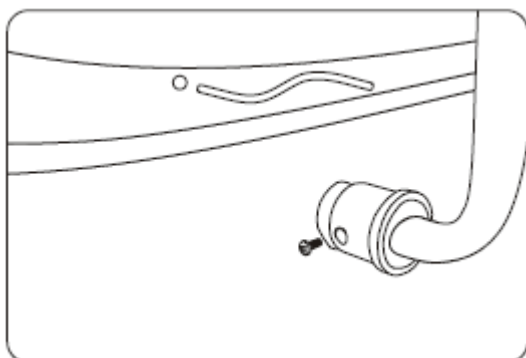


Obr. 9

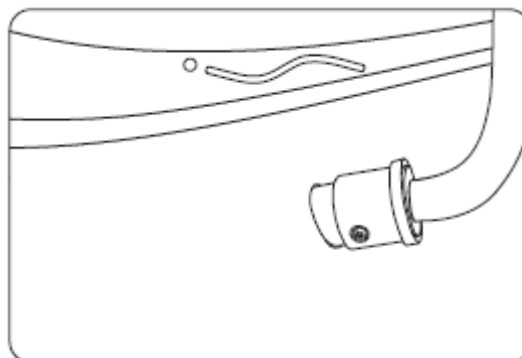


Obr. 10

4. Nastavenie a použitie ovládacieho panela


Po upevnení panela k rámu kresla (Obr. 1) možno držiakom voľne otáčať a pohybovať do strán (Obr. 2 a 3).

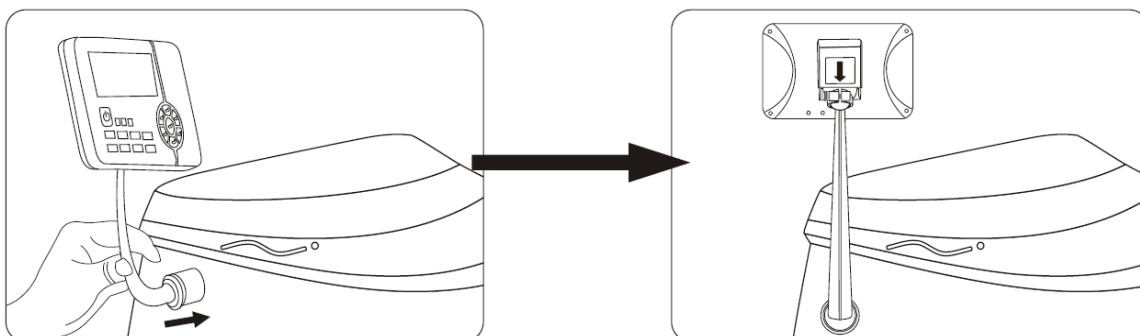

Obr. 1

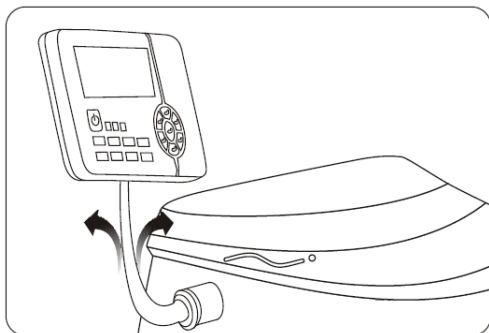


Obr. 2

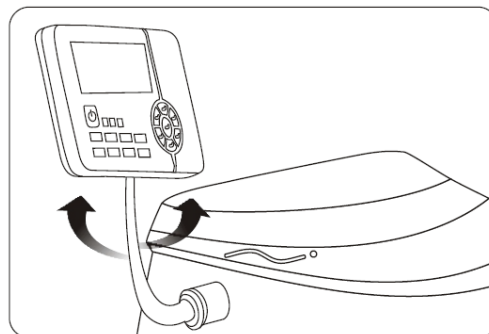


Obr. 3

5. Vankúšik pod hlavu a čalúnenie chrbta

Vankúšik pod hlavu a chrbtové čalúnenie sú odnímateľné časti znižujúce silu masážnych hlavíc. Ich používanie sa odporúča, ale nie je povinné (záleží na preferenciách používateľa). Čalúnenie chrbta sa upevňuje zipsom (1), vankúšik pod hlavu pomocou suchého zipsu (2).

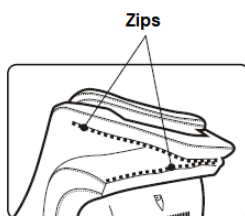

(1)

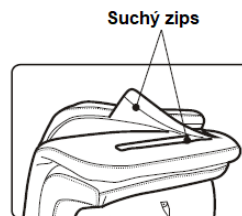


(2)

6. Ochrana podlahy


Najmä v prípade drevenej podlahy umiestnite pod masážne kreslo koberec alebo inú ochrannú podložku.

VAROVANIE: Nepresúvajte kreslo na kolieskach po drevenej podlahe, nerovnom povrchu alebo v úzkom priestore. Kreslo by mali dvíhať aspoň 2 osoby.

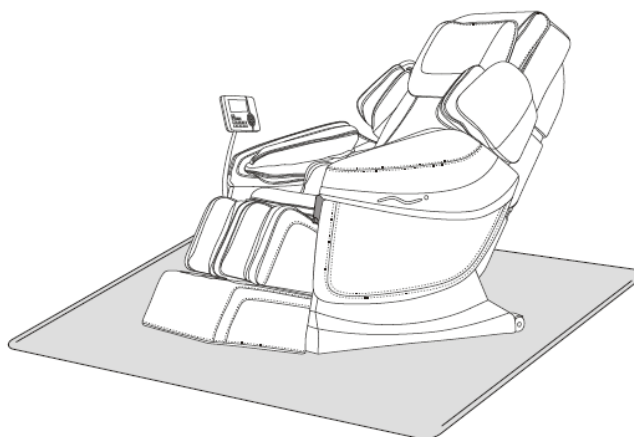

7. Presúvanie

Uistite sa, že Vám v ceste nebudú prekážať žiadne káble. Nakloňte kreslo dozadu na transportné kolieska a opatrne ho odtiahnite na požadované miesto.

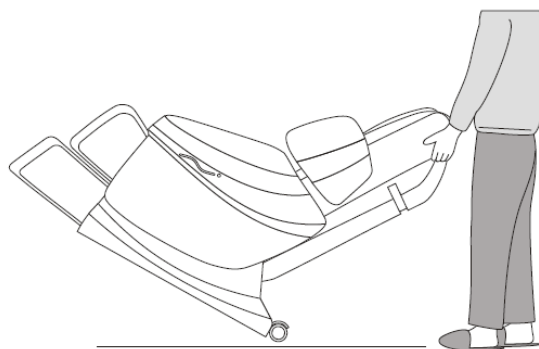

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Model: A50

Názov: Masážne kreslo

Napätie:

- 110-120V-60Hz
- 220-240V-50Hz/60Hz

Príkon: 200W

Max dĺžka masáže: 20 min

Trieda bezpečnosti: Trieda I

Materiál: PVC, PA, oceľ, električka a elektronika

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk

2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: