




UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 11115 Masážne kreslo inSPORTline Dugles

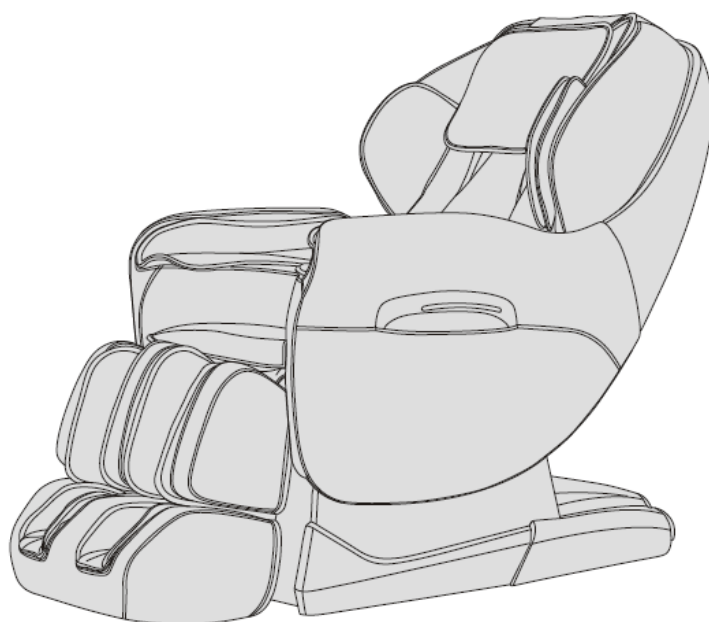

OBSAH

BEZPEČNOST A ÚDRŽBA	3
KOMPONENTY	5
FUNKČNÁ VÝBAVA	5
OVLÁDANIE	6
INŠTALÁCIA	10
ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU	17
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	17
ZÁRUČNÍ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	17

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Prečítajte si celý manuál, aby ste boli schopný masážne kreslo správne používať. Dbajte na dodržiavanie bezpečnostných pokynov. Po prečítaní si manuál uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

POZNÁMKA: Naša spoločnosť si vyhradzuje právo aktualizovať vzhľad a charakteristiku výrobku bez povinnosti predchádzajúceho upozornenia. Farebné prevedenie závisí na aktuálnom modeli masážneho kresla.

BEZPEČNOSŤ A ÚDRŽBA

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- Zabráňte deťom kontaktu s pohyblivými časťami kresla.
- Pre napájanie tohto prístroja použite zodpovedajúci elektrický zdroj s riadnym uzemnením.
- Z bezpečnostných dôvodov a pre ochranu kresla odpojte po každom použití a pred čistením napájací kábel z elektrickej siete.
- Kreslo používajte iba tak, ako je popísané v manuáli.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Kreslo používajte iba v interiéri.
- Pred použitím si riadne prečítajte tento manuál.
- Používanie kresla spôsobom, ktorý nie je uvedený v tomto manuáli, je zakázané.
- Odporúčaná dĺžka masáže: 20 minút.
- Kreslo nepoužívajte, ak došlo k poškodeniu či popraskaniu kože.
- Kreslo nepoužívajte, ak došlo k poškodeniu krycieho materiálu či iných častí.
- Kreslo nepoužívajte, pokiaľ je vetrací otvor upchatý alebo je zamedzené správne vetranie.
- Na kreslo nekladte žiadne predmety.
- Počas používania kresla nezaspiť.
- Kreslo nepoužívajte po požití alkoholu či iných omamných látok.
- Po konzumácii jedla nepoužívajte kreslo skôr ako za hodinu.
- Nevoľte príliš vysokú intenzitu masáže, aby nedošlo k vzniku zranení.
- Kreslo umiestnite na rovný, čistý a suchý povrch. Zachovajte bezpečnostný odstup min. 0,6 m.
- **Maximálna nosnosť:** 120 kg

UMIESTNENIE MASÁŽNEHO KRESLA

- Nepoužívajte kreslo pri vysokej okolitej teplote a vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni).
- Nepoužívajte kreslo bezprostredne po zmene okolitej teploty.
- Kreslo nepoužívajte v prašnom či akokoľvek nepriaznivom prostredí.
- Okolo kresla je potrebné zabezpečiť dostatočný voľný priestor pre vetranie.

KRESLO BY NEMALI POUŽÍVAŤ

- Ľudia trpiaci osteoporózou.
- Ľudia trpiaci srdcovým ochorením alebo ľudia s elektronickými implantátmi (napr. kardiostimulátorom).
- Ľudia so zvýšenou telesnou teplotou.
- Tehotné ženy a ženy v období menštruácie.

- Osoby trpiace poúrazovými stavmi.
- Ľudia s kožnými problémami.
- Deti mladšie ako 14 rokov alebo osoby s mentálnym postihnutím.
- Ľudia, ktorí majú od lekára odporúčaný kľudový režim alebo sa necítia dobre.
- Ľudia s mokrou kožou po sprchovaní, cvičení apod.
- Povrch kresla je vyhrievaný, preto musia ľudia citliví na vysokú teplotu dbať na zvýšenú opatrnosť.

BEZPEČNOSŤ

- Uistite sa, že má elektrický zdroj vhodné napätie.
- Nezapájajte napájací kábel mokrými rukami.
- Do kresla sa nesmie dostať voda, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom či poškodeniu výrobku.
- Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu káblov a neupravujte elektrický obvod kresla.
- Na čistenie elektrických častí ako je vypínač a zástrčka nepoužívajte vlhkú handru.
- Pri prerušení prísunu elektrickej energie dbajte mimoriadnej opatrnosti, aby pri opätovnom zapnutí elektrického obvodu nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Ak kreslo nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na servisné centrum.
- Ak sa počas masáže necítite dobre, prestaňte kreslo používať a poraďte sa s lekárom.



ÚDRŽBA

- Údržbu vždy zverte kvalifikovanému servisnému technikovi. Kreslo nerozoberajte ani inak nezasahujte do jeho konštrukcie.
- Po použití odpojte prístroj od elektrickej siete.
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený napájací kábel alebo elektrická zásuvka.
- Pred dlhodobým skladovaním zmotajte kabeláž a uskladnite kreslo v suchom, čistom prostredí.
- Nevystavujte kreslo vysokým teplotám, neumiestňujte ho do blízkosti ohňa a chráňte ho pred dlhodobým pôsobením priameho slnečného žiarenia.
- Kreslo čistite suchou handričkou. Na čistenie nepoužívajte riedidlo, benzín ani alkohol.
- Vďaka kvalitnému spracovaniu nevyžadujú mechanické časti kresla žiadnu mimoriadnu údržbu.
- Chráňte kreslo pred kontaktom s ostrými predmetmi.
- Neposúvajte kreslo po nerovnom povrchu. Pri presúvaní kreslo vždy nadvihnite a preneste.
- Pri prevádzke kresla robte prestávky. Nenechávajte kreslo spustené príliš dlho.

BEŽNÉ PORUCHY A ICH RIEŠENIE

- Je prirodzené, že počas prevádzky prístroja budete počuť chod motora.
- Ak kreslo nefunguje, skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel a sieťový vypínač zapnutý.
- Masáž sa automaticky ukončí pri dosiahnutí nastaveného časového intervalu. Prístroj sa tiež automaticky vypne, ak pobeží príliš dlho a začne sa prehrievať. V tomto prípade nechajte prístroj pred opätovným spustením aspoň pol hodiny vychladnúť.

KOMPONENTY

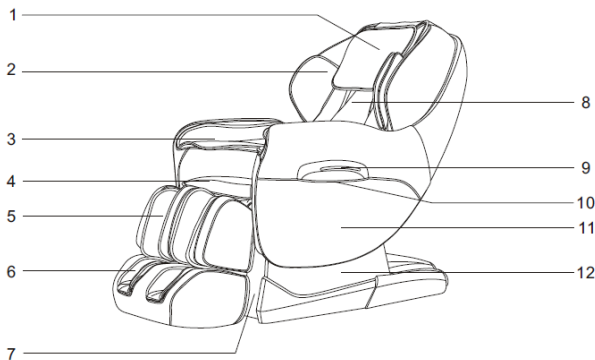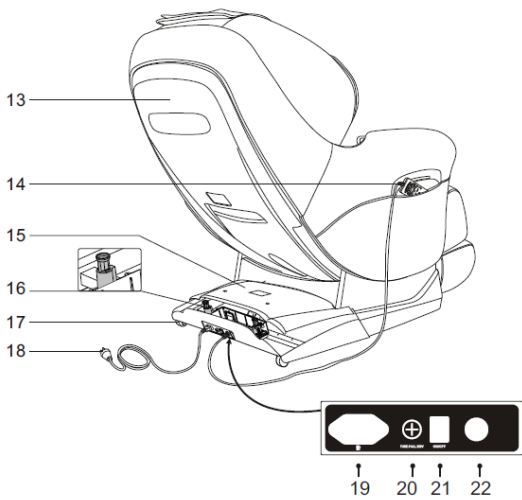	
1. Čalúnená opierka hlavy 2. Vzduchový vankúšik v oblasti paže 3. Vzduchový vankúšik v oblasti predlaktia 4. Čalúnená sedacia časť 5. Lýtková opierka 6. Podpera chodidiel 7. Doraz lýtkových opierok 8. Chrbtová opierka 9. Dekoratívny LED indikátor 10. Vrecko na ovládač 11. Bočná opora	12. Bočný kryt 13. Zadný kryt 14. Ovládač 15. Kryt hnacieho ústrojenstva 16. Bezpečnostný vypínač 17. Transportné koliesko 18. Napájací kábel 19. Zdieľka pre napájací kábel 20. Poistková skriňa 21. Sieťový vypínač 22. Zdieľka pre ovládač


FUNKČNÁ VÝBAVA

- Prístroj je vybavený sadou vertikálne sa pohybujúcich masážnych hlavíc so 4 masážnymi kolieskami.
- Typy masáže: shiatsu, stláčanie, búchanie, poklepávanie, súčasné stláčanie a plieskanie.
- Automatická detekcia a lokácia ramennej oblasti.
- Automatické masážne funkcie (celkom 6): úľava od bolesti, osvieženie, uvoľnenie, intenzívna masáž, masáž hornej polovice tela, masáž spodnej polovice tela.
- Pamäť na masážne funkcie M1 a M2.
- Manuálna masáž hornej polovice tela s 3 možnosťami nastavenia: bodová, lokálna a kompletná (rýchlosť nastaviteľná v 5 stupňoch). V režimoch plieskanie, shiatsu a poklepávanie možno vzdialenosť medzi dvoma masážnymi hlavícami nastaviť v 3 úrovniach: široká, stredná a úzka. Pri bodovej a lokálnej masáži možno masážne hlavice posúvať hore a dole pre nájdenie optimálnej polohy.
- Vzduchová masáž obsahuje 3 režimy: masáž celého tela, masáž horných končatín (4 vzduchové vankúšiky na paže, 8 vankúšikov na predlaktie), masáž dolných končatín (16 vzduchových vankúšikov) - vzduchová masáž je nastaviteľná v 3 intenzitách.



- Podpierky nôh sú vybavené valčekmi pre masáž spodnej strany chodidiel, dvoma párami masážnych bodov pre rotačnú masáž v oblasti koreňa palca a masážnou funkciou pre zjemnenie kože v oblasti klenby a päty chodidiel.
- Vyhrievanie v oblasti chrbta: zdrojom je karbónové vlákno s dlhovlnným infračerveným žiarením.
- Dekoratívny LED indikátor na bočnej strane kresla.
- Opierky lýtok umožňujú plynulý posun pre nastavenie výšky užívateľa.
- Špeciálny dizajn chrbtovej opory umožňujúci tesné prisunutie k stene pre maximálnu úsporu miesta.
- Nastaviteľný sklon opierok nôh, nastaviteľný sklon chrbtovej opierky a funkcia automatického sklápania kresla.
- Dizajn v tvare písmena L kopírujúci krivky tela pre maximálne uvoľnenie organizmu.

OVLÁDANIE

OVLÁDAČ (ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK):

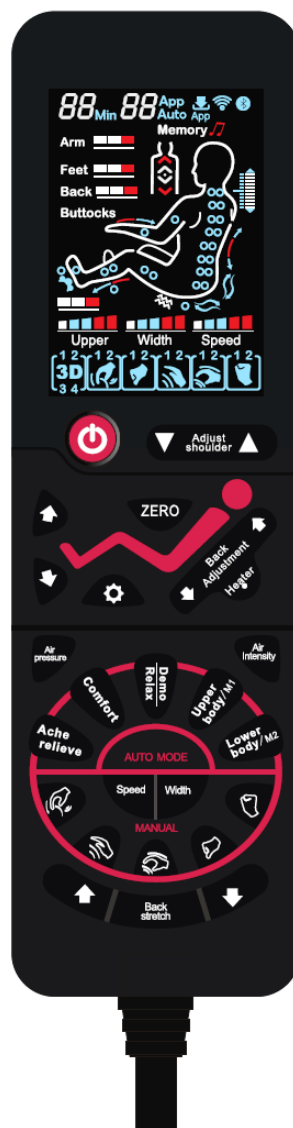



1. ZAPOJENIE

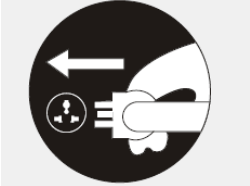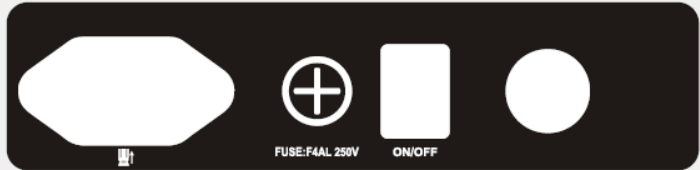 Zapojenie napájacieho kábla	 Umiestnenie sieťového vypínača ON/OFF
--	---

2. ZAPNUTIE MASÁŽE

- 1) Po stlačení tlačidla Power sa kreslo automaticky nakloní a spustí sa masážny režim.
- 2) Vyčkajte, než skončí automatická detekcia polohy ramien a akupresúrnych bodov.
- 3) Polohu masážnych hlavíc môžete prispôbiť pomocou tlačidiel UP a DOWN. Ramenná oblasť je nastaviteľná v 10 úrovniach. Masáž sa automaticky spustí po 10 sekundách od nastavenia polohy masážnych hlavíc.

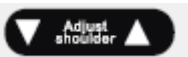Tlačidlo	Funkcia	Zobrazenie
	Posun masážnych hlavíc smerom nahor alebo nadol.	

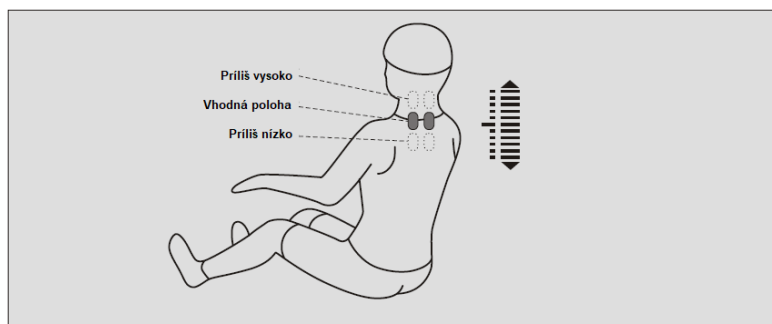

- 4) Výber masážne funkcie

Použitie pamäťových tlačidiel:

3-sekundovým podržaním tlačidla „Upper body/M1“ alebo „Lower body/M2“ spustíte masážny režim, ktorý si pamätá nastavenie kresla z poslednej uloženej masáže.




Funkcia	Tlačidlo	Zobrazenie
Výber masáže pomocou pamäťových tlačidiel		Memory
		Memory

Automatické masážne režimy

Funkcia	Tlačidlo	Charakteristika	Zobrazenie
Auto masáž		Hlboká masáž akupresúrnych bodov, účinná úľava od bolesti.	Auto F1
		Komfortná masáž.	Auto F2
		Podpora krvného obehu.	Auto F3
		Komplexná masáž (podržaním tlačidla na 2 sekundy možno regulovať rýchlosť).	Auto F4
		Masáž zameraná na hornú polovicu tela.	Auto F5
		Masáž zameraná na spodnú polovicu tela.	Auto F6

Masáž hornej polovice tela

Funkcia	Tlačidlo	Nastavenie masážnych hlavíc	Zobrazenie
Technika		Rýchlosť a rozteč	
		Rýchlosť	
		Rýchlosť a rozteč	
		Rýchlosť	
		Rýchlosť a rozteč	
Rýchlosť		3 úrovne	
Rozteč		3 úrovne	

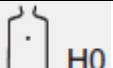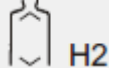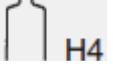Funkcia	Tlačidlo	Charakteristika		Zobrazenie
Nastavenie chrbtovej opierky		Masáž 1 bodu (akupresúrny bod)		
		Masáž o malom rozsahu (lokálna)		
		Plošná masáž		
		Masáž hornej polovice tela		
		Masáž spodnej polovice tela		
		Nastavenie cieľovej oblasti (akupresúrneho bodu / lokálnej masáže)	Posunúť masážne hlavice nahor.	
			Posunúť masážne hlavice nadol.	

Vzduchová masáž

Funkcia	Tlačidlo	Charakteristika	Zobrazenie
Režim vzduchovej masáže		K dispozícii sú celkom 3 masážne režimy.	Arm  Feet 
Intenzita		Nastaviteľná v 3 stupňoch.	Arm  Feet 

Ďalšie manuálne funkcie

Funkcia	Tlačidlo	Charakteristika	Zobrazenie
Masážny valček		Masáž spodnej strany chodidiel: rýchlosť nastaviteľná v 3 stupňoch.	
Vyhrievanie		Vyhrievanie chrbtovej časti (dlhovlnné infračervené žiarenie), kreslo sa plne zahreje 3 minúty od aktivácie funkcie.	

Ďalšie manuálne funkcie

Funkcia	Tlačidlo	Charakteristika
Sklon lýtkovej opory		Tlačidlo pre zdvihnutie lýtkovej opory, opora sa pomaly dvíha, kým držíte tlačidlo.
		Tlačidlo pre zníženie lýtkovej opory, opora sa pomaly znižuje, kým držíte tlačidlo.
Sklon chrbtovej opierky		Tlačidlo pre zdvihnutie chrbtovej opierky, opora sa pomaly dvíha, kým držíte tlačidlo.
		Tlačidlo pre zníženie chrbtovej opierky, opora sa pomaly znižuje, kým držíte tlačidlo.
Automatické sklopenie		Počas masážnych režimov slúži tlačidlo pre automatické sklopenie kresla.

3. Vypnutie/zastavenie masáže

- 1) Počas masáže stlačte tlačidlo Power - masážny režim sa ukončí, chrbtová a lýtkové opierky sa vrátia do východiskovej polohy a Vy medzitým môžete masážny režim uložiť do pamäti.


Masáž sa ukončí po vypršaní vopred nastaveného časového intervalu a Vy následne môžete uložiť masážny režim do pamäti - nedochádza k automatickému nastaveniu opôr späť do východiskovej polohy.

- 2) Pamäť masážneho režimu: Po ukončení masáže sa na ovládači zobrazí hlásenie "Memory" - tzn. užívateľ môže pred vypnutím prístroja použiť tlačidlo M1 alebo M2 a uložiť aktuálne nastavenie do pamäte.
- 3) Po skončení masáže vypnite sieťový vypínač.

	
Umiestnenie sieťového vypínača ON/OFF	Odpojenie napájacieho kábla

INŠTALÁCIA


VAROVANIE!

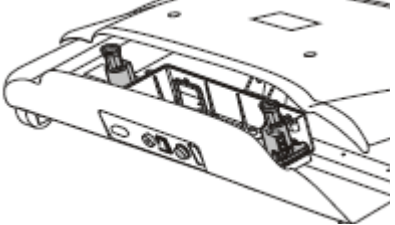	Z bezpečnostných dôvodov nekladte na napájaciu skriňu žiadne predmety. Môže dôjsť k zablokovaniu naklápacieho mechanizmu.
---	---


1. Demontáž bočných opôr

Poznámka: Túto demontáž vykonávajte len v prípade krajnej nutnosti, za účelom transportu do malých priestorov (pri prechode úzkymi dverami a pod.).

- Po vybalení z prepravnej škatule najskôr sklopte dolu lýtkové opory. (Obr. 1)
- Zložte čalúnenie chrbta (poznámka: pred demontážou chrbtového čalúnenia sa uistite, že je odpojený kábel od vyhrievania). (Obr. 2)

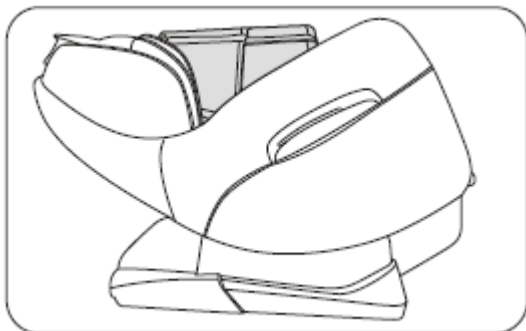


Obr. 1

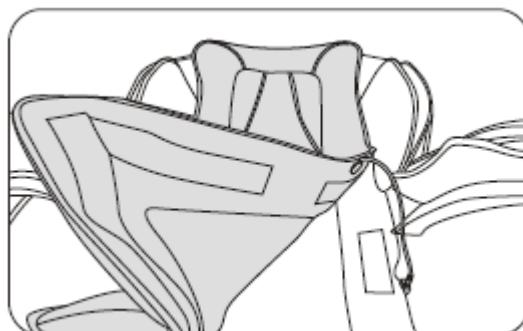


Obr. 2

- Rozopnite vankúšik v chrbtovej oblasti a prehodte látku cez vrchný okraj kresla (poznámka: predchádzajte zašpineniu či poškodeniu poťahu). (Obr. 3)
- V oblasti lýtok je kryt vybavený nasúvacím mechanizmom (Obr. 4).

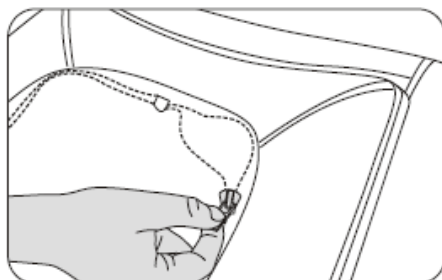


Obr. 3

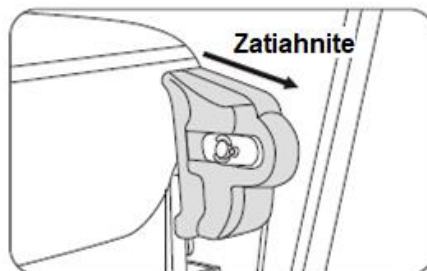


Obr. 4

- Vyskrutkujte 8 skrutiek ktoré fixujú dosku základne (demontáž spodných 4 skrutiek nie je nutná). (Obr. 5).
- Dosku základne roztvorte a rozpojte kĺb vzduchovej hadice a napájanie bočnej opory. (Obr. 6)

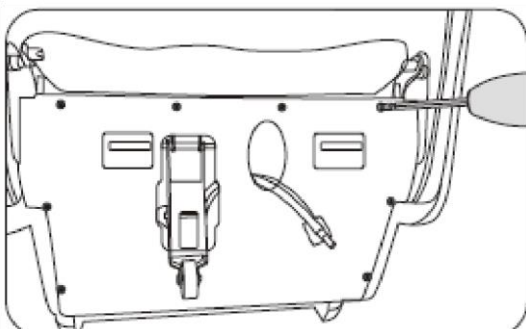


Obr. 5

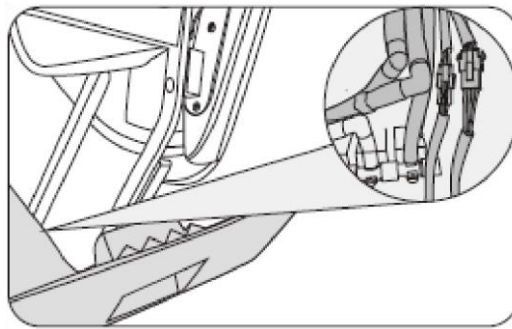


Obr. 6

- Vyskrutkujte spojovací materiál v prednej časti bočnej opory. (Obr. 7 a 8)

Poznámka: Skrutky sú z vnútornej strany. Nestraťte dištančné valčeky.

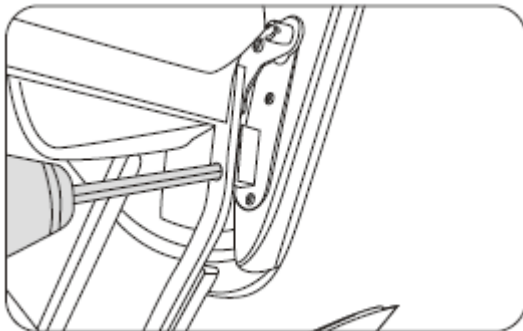


Obr. 7

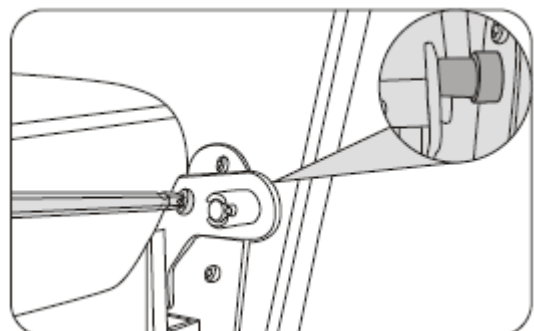


Obr. 8

- Vyskrutkujte spojovací materiál v zadnej časti bočnej opory (Obr. 9).
- Ľahko nadvihnite prednú časť bočnej opory - uvoľnite istiaci mechanizmus. (obr. 10)

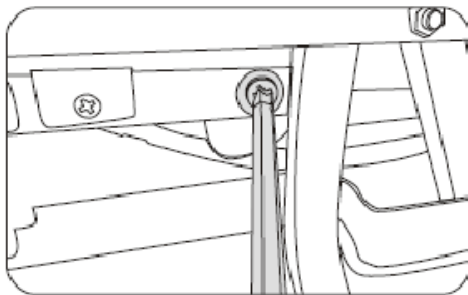


Obr. 9

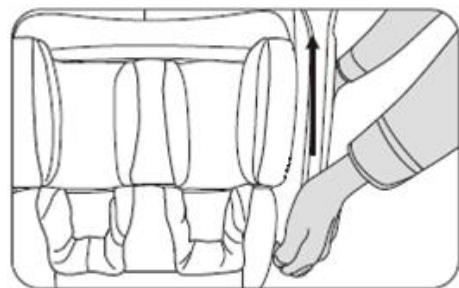


Obr. 10

- Pre uvoľnenie krytu mierne zatlačte zadnú časť bočnej opory smerom dopredu a nadvihnite ho, aby sa uvoľnil istiaci mechanizmus. (Obr. 11)
- Rozpojte hornú vzduchovú trubicu (Obr. 12) a zložte bočný kryt.

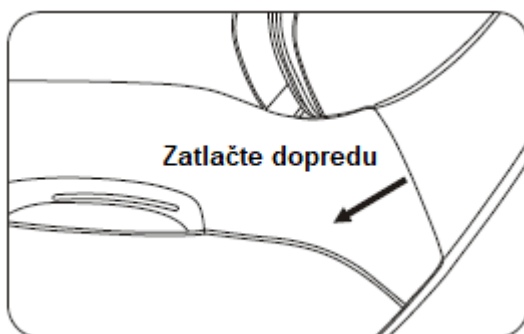


Obr. 11

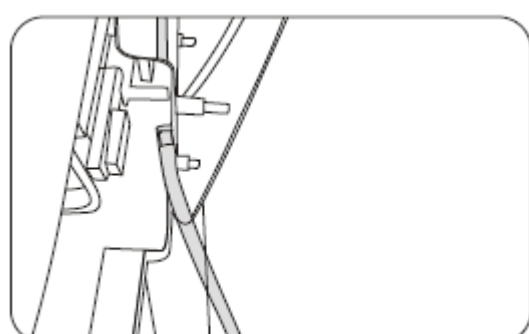

Obr. 12

2. Montáž bočných opier

- Prepojte vzduchovú trubicu vychádzajúcu zo zadnej časti bočnej opory s trubicou v oblasti paží. (obr. 1)
- Zasuňte vzduchovú trubicu a elektrický kábel do oceleového rámu (predchádzajú zablokovaniu vzduchovej trubice). (Obr. 2).

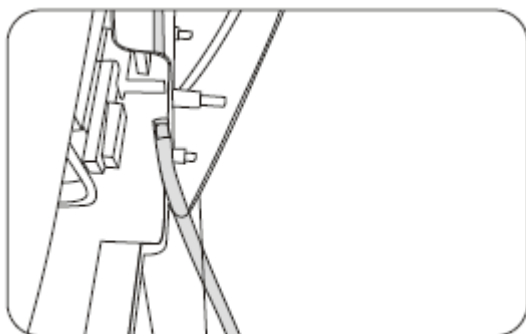


Obr. 1




Obr. 2

- Zaháknite zadnú časť bočnej opory do oceľového rámu (do hornej polohy). (Obr. 3)
- Zasuňte bočnú opierku do krytu hornej opory. (Obr. 4)

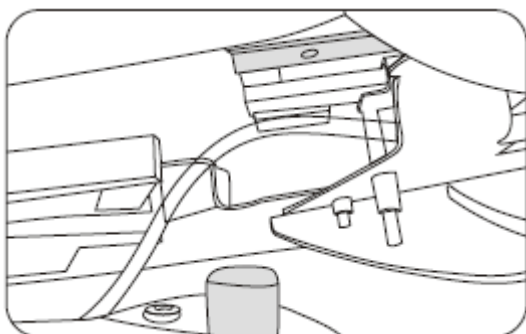


Obr. 3

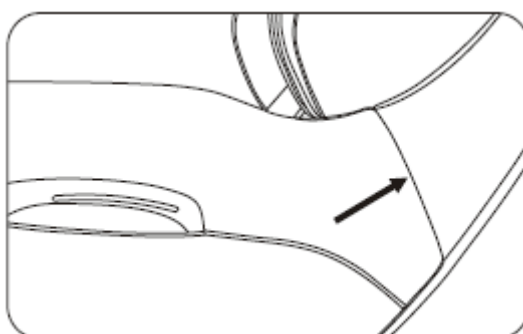


Obr. 4

- Zaháknite prednú časť bočnej opory do oceľového rámu a oporu zaistite (Obr. 5).
- Zatlačte opierku ľahko smerom nadol a uistite sa, že je riadne zaistená. (Obr. 6)

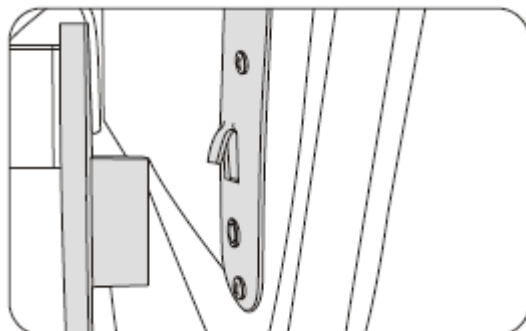


Obr. 5

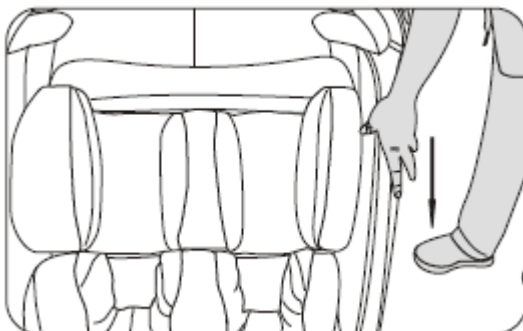


Obr. 6

- Umiestnite dištančné teliesko medzi bočnú oporu a háčik lýtkovej opory, a utiahnite spojovací materiál. (Obr. 7)
- Uťahnite spojovací materiál v zadnej časti bočnej opory. (Obr. 8)

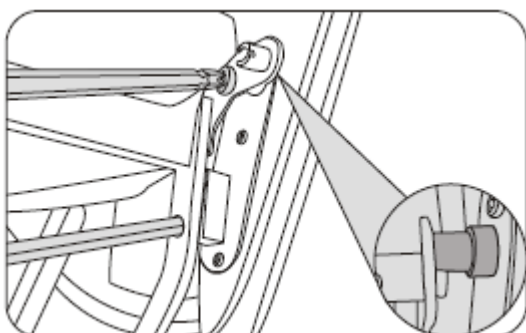


Obr. 7

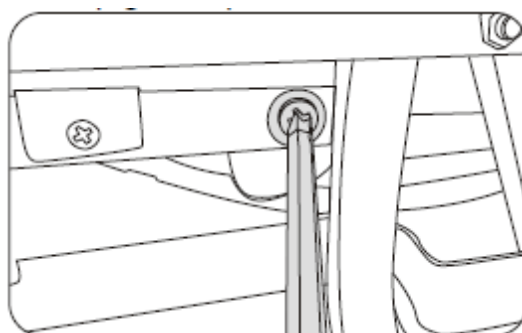


Obr. 8

- Prepojte vzduchovú trubicu a elektrické káble (pozn. : káble sú veľkostne označené). (Obr. 9)
- Prevlečte vzduchovú trubicu a elektrický kábel doskou základne a zaskrutkujte spojovací materiál. (Obr. 10)

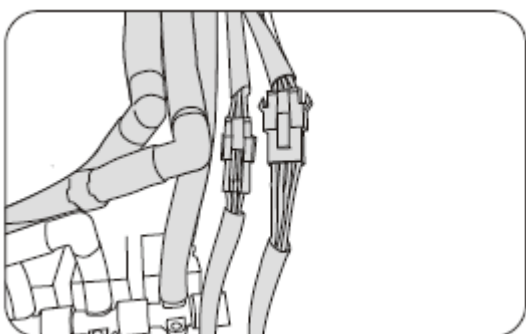


Obr. 9

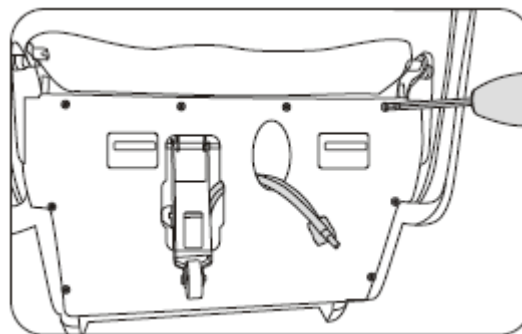


Obr. 10

- Zapnite vankúšik v chrbtovej oblasti. (Obr. 11)
- Pripojte k chrbtovej opierke kábel od vyhrievania a nasadte čalúnenie chrbta. (Obr. 12)

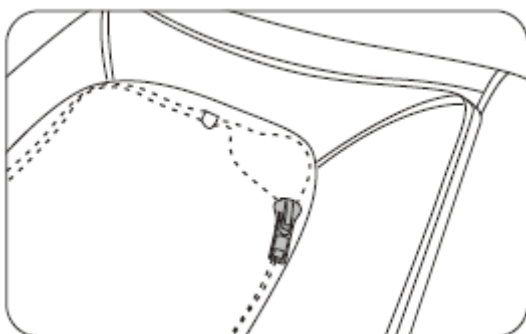


Obr. 11

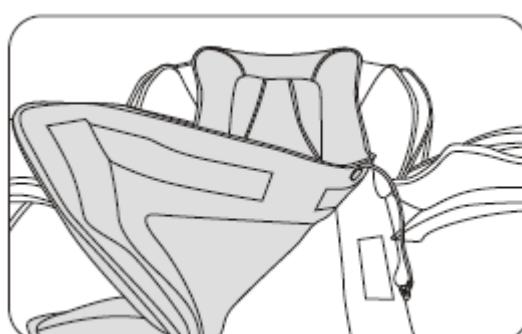

Obr. 12


- V oblasti lýtok je kryt vybavený nasúvacím mechanizmom (pozn. : uistite sa, že je kryt riadne upevnený).

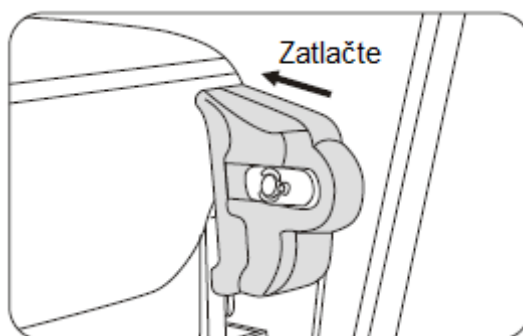


Obr. 13

3. Montáž lýtkových opierok

- Najskôr zasadíte čapy do osi lýtkových opier. Čapy nastavíte tak, aby umožňovali zastrčenie závlačky. (Obr. 1 a 2)

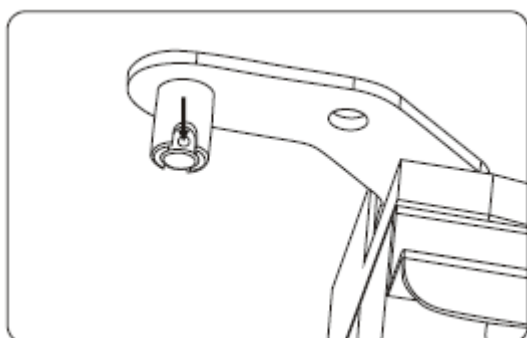


Obr. 1

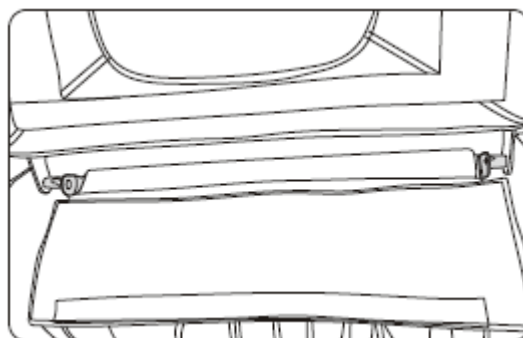


Obr. 2

- Zasadíte do čapov závlačky. (Obr. 3 a 4)

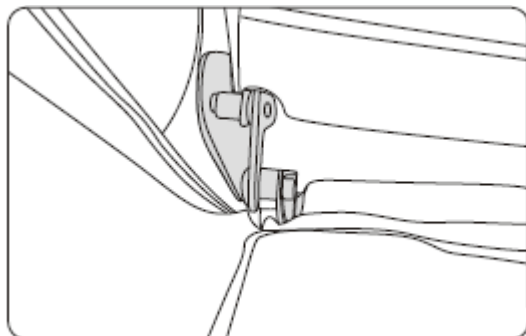


Obr. 3

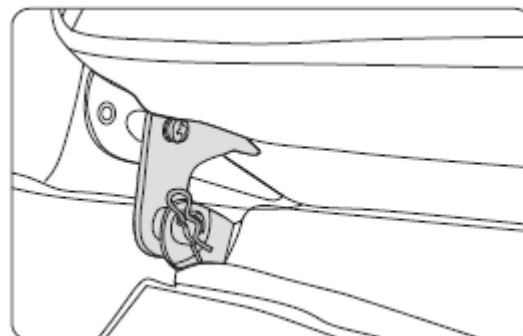


Obr. 4

POZNÁMKA:

- Ak je kreslo nastavené na masáž v ľahu, s lýtkovými oporami v horizontálnej polohe, netlačte z bezpečnostných dôvodov na lýtkové opory celou svojou váhou (Obr. 1).
- Skontrolujte, či nie sú masážne hlavice zosunuté do sedacej časti. Posunuté čalúnenie pôsobí nepohodlne v oblasti zadku. (Obr. 2)

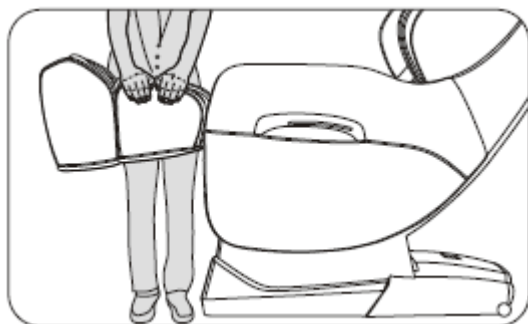



Obr. 1

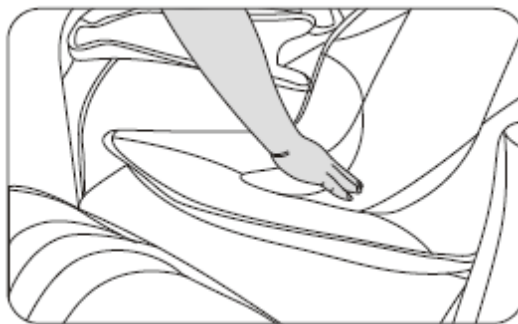


Obr. 2

4. Demontáž opierky hlavy a chrbtového čalúnenie

Použitím čalúnenia môžete znížiť intenzitu masáže v oblasti ramien a krku. Čalúnenie používajte podľa aktuálnej potreby (vankúšik pod hlavu odporúčame používať vždy). Čalúnenie chrbta a chrbtovej opierky sa upína zipsom (1), opierka hlavy a chrbtová opierka sa upevňuje na suchý zips (2).

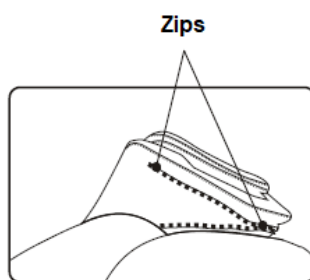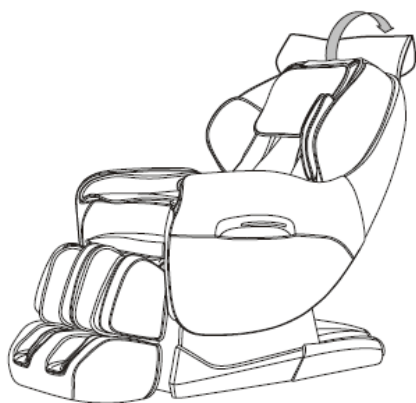


(1)

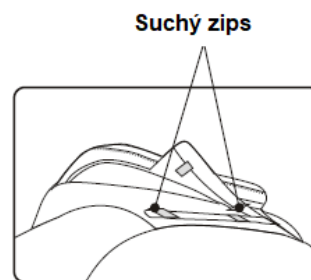

(2)

5. Ochrana podlahy


Najmä v prípade drevenej podlahy umiestnite pod masážne kreslo koberec alebo inú ochrannú podložku.

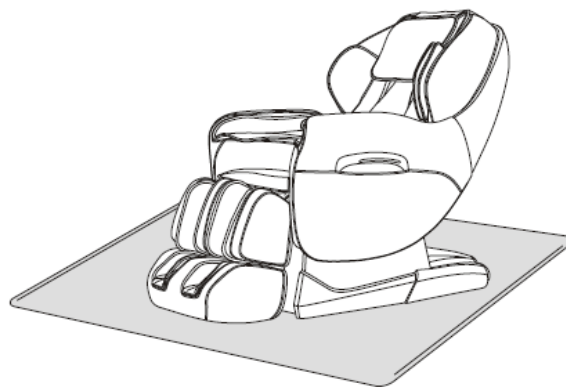

Upozornenie: Nepresúvajte kreslo na kolieskach po drevenej podlahe, nerovnom povrchu alebo v úzkom priestore. Kreslo by mali dvíhať aspoň 2 osoby. Kreslo zdvíhajte za rám a chrbtovú opierku (nie za bočné opory).

6. Presúvanie

Uistite sa, že Vám v ceste nebudú prekážať žiadne káble. Nakloňte kreslo dozadu na transportné kolieska a opatrne ho odtiahnite na požadované miesto.

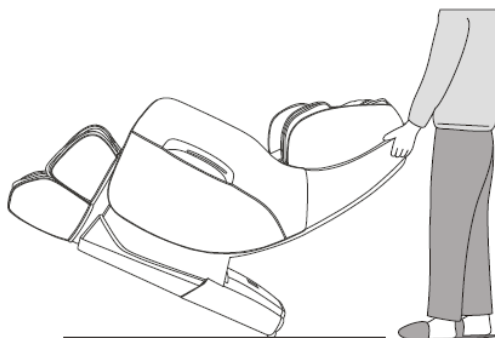

Poznámka: Nezabudnite najskôr vypnúť sieťový vypínač, odpojiť napájací kábel a kábel ovládača.

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Model: A38

Názov: Masážne kreslo

Napätie:

- 110-120V-60Hz
- 220-240V-50Hz/60Hz

Príkon: 150W

Max dĺžka masáže: 20 min

Trieda bezpečnosti: Trieda I

Materiál: PVC, PA, oceľ, električka a elektronika

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÍ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk

2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajca: