




**UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK**  
**IN 14649 Masážny pás inSPORTline Absagy**

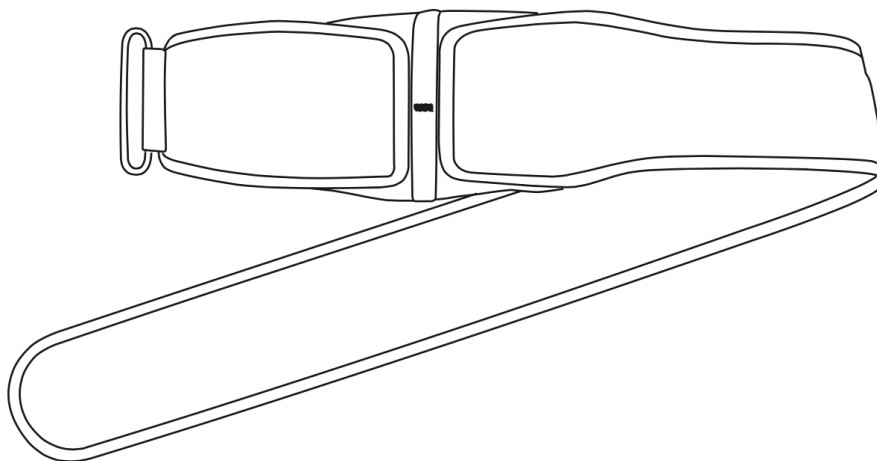

## OBSAH

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....           | 3 |
| ŠPECIFIKÁCIE .....                  | 4 |
| ZOZNAM DIELOV .....                 | 4 |
| POUŽITIE .....                      | 4 |
| Automatické vypnutie .....          | 5 |
| ÚDRŽBA .....                        | 5 |
| ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE ..... | 5 |

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý manuál. Manuál si uschovajte pre prípadné budúce použitie.

Ak používate elektrické spotrebiče, najmä ak sú v blízkosti deti, vždy sa musia dodržiavať základné bezpečnostné zásady, vrátane tých, ktoré sú uvedené v tomto manuáli.

### NEBEZPEČENSTVO

Ak chcete znížiť riziko možného elektrického šoku, dodržujte nasledujúce zásady:

- Pred čistením a hneď po použití vždy odpojte prístroj z napájania.
- Ak prístroj spadne do vody, nesnažte sa prístroj vyloviť. Ihneď ho odpojte z napájania.

### VAROVANIE

Ak chcete znížiť riziko možných popálenín, elektrického šoku, vzplanutia alebo zranenia, dodržujte nasledujúce zásady:


- Nikdy neopúšťajte miestnosť, ak je prístroj stále zapojený do napájania, obzvlášť vtedy, ak sú v jeho blízkosti deti. Ak budete s prístrojom akokoľvek manipulovať, odpojte ho najskôr z elektriky.
- Deti a duševne či mentálne postihnuté osoby smú tento prístroj používať iba pod dozorom dospelých.
- Prístroj nepoužívajte vo vonkajších priestoroch.
- Používajte prístroj iba podľa inštrukcií v tomto manuáli. Nepoužívajte príslušenstvo a doplnky, ktoré neboli odporúčané výrobcom a ktoré neboli dodané spoločne s prístrojom.
- Neprenášajte prístroj pomocou napájacieho kábla, ani ho za kábel nezdvíhajte.
- Prístroj nepoužívajte, ak sú napájací kábel alebo zástrčka akokoľvek poškodené, ak správne nefungujú, alebo ak prišli do kontaktu s vodou.
- Uchovávajte napájací kábel mimo dosahu zahriatych plôch.
- Uistite sa, že ventilačné otvory nie sú ničím zablokované. Nikdy prístroj nepokladajte na mäkký povrch, napríklad na posteľ alebo pohovku. Ventilačné otvory by sa tak mohli zablokovat'. Pravidelne kontrolujte, či v otvoroch nie sú zachytené vlasy, prach a ďalšie nečistoty.
- Do otvorov v prístroji nič nestrkajte.
- Nepoužívajte prístroj v priestoroch, kde sa používajú aerosólové spreje alebo v priestoroch so zvýšeným množstvom kyslíka.
- Nepoužívajte prístroj pod dekou alebo vankúšmi. Prístroj sa môže prehriať a spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo zranenia.
- Ak chcete prístroj vypnúť, vypnite všetky tlačidlá ovládania a vyberte zástrčku zo zásuvky.
- Buďte pri používaní masážneho prístroja opatrný. Môžete si privodiť vážne popáleniny. Neaplikujte prístroj na citlivé miesta alebo na miesta so zlým krvným obehom.
- Tento výrobok nie je určený na lekárske účely. Je určený len na poskytovanie masáže.
- Pred použitím sa najskôr poraďte s lekárom, ak:
  - Ste tehotná žena.
  - Máte kardiostimulátor.
  - Máte akokoľvek pochybnosti o svojom zdravotnom stave.
- Používanie tohto prístroja sa neodporúča diabetikom.
- Zapnutý prístroj nikdy ničím nezakrývajte.

- Nepoužívajte prístroj dlhšie než 15 minút v kuse. Po 15 minútach sa prístroj automaticky vypne.  
Používanie prístroja po dlhšiu dobu môže viesť k prehriatiu a zníženiu životnosti. Ak sa zariadenie prehreje, okamžite ho prestaňte používať a nechajte ho vychladnúť.
- Nikdy prístroj neaplikujte na poškodenú pokožku alebo na opuchnuté alebo zápalové oblasti.
- Nepoužívajte prístroj tesne pred tým, ako pôjdete spať. Masáž má stimulujúce účinky a môže tak spánok oddialiť.
- Nikdy prístroj nepoužívajte v posteli.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený priamo výrobcom, servisným technikom alebo inou kvalifikovanou osobou.

## ŠPECIFIKÁCIE


|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Napájací kábel | 100-240 V~50/60 Hz |
| Výkon          | DC 12 V 1 A        |
| Batéria        | CR 2032 3 V        |

## ZOZNAM DIELOV
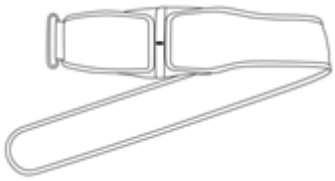
|                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Masážny pás 1 ks</p> |  <p>Diaľkové ovládanie 1 ks</p> |  <p>Napájací kábel 1 ks</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## POUŽITIE


1. Vložte do diaľkového ovládania batériu (nie je súčasťou balenia).

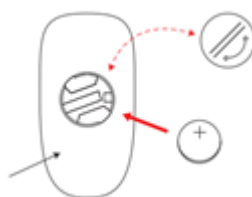


2. Uistite sa, že zdroj napájania zodpovedá špecifikáciám napájacieho kábla. Zapojte zástrčku do napájania.
3. Zapojte napájací kábel do masážneho pásu.



4. Nasadte si masážny pás. Môžete ho umiestniť nasledovne:

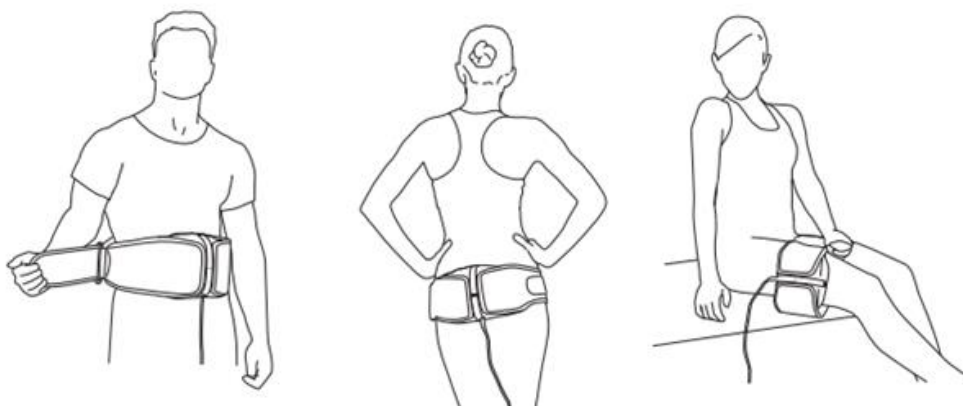

5. Pre spustenie masáže stlačte tlačidlo Vypnúť/Zapnúť  priamo na masážnom páse alebo na diaľkovom ovládaní. Pre optimálny príjem signálu nasmerujte červený ukazovateľ do oblasti znázornenej na obrázku.

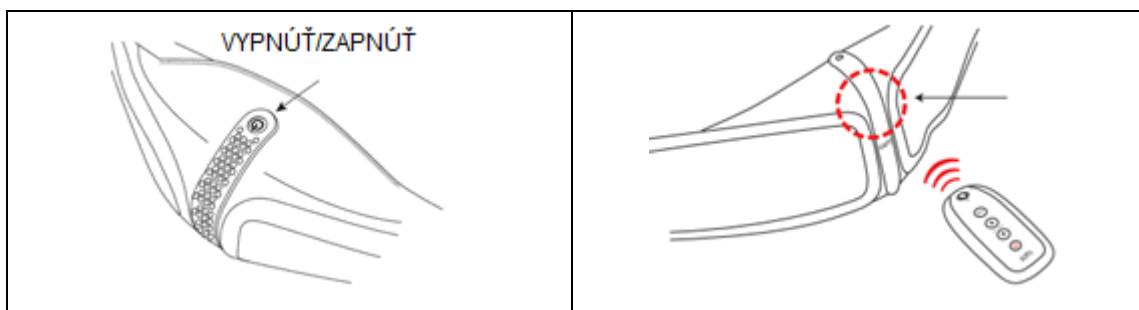

6. Ak chcete zvýšiť intenzitu masáže, stlačte „+“. Ak chcete vibrácie zmierniť, stlačte „-“.
7. Ak chcete spustiť automatickú masáž, stlačte „**AUTO**“.
8. Pre vypnutie masáže opäť stlačte tlačidlo Vypnúť/Zapnúť.

## Automatické vypnutie

Vibračný pás je vybavený funkciou bezpečnostného vypnutia. Zariadenie sa automaticky vypne približne po 15 minútach nepretržitej činnosti.

## ÚDRŽBA

VÝROBOK SE NESMIE PRAŤ.

- Pred čistením odpojte zariadenie z elektriny.
- Očistite pás vlhkou handričkou.
- Skladujte výrobok na suchom a chladnom mieste.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

### Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

#### **Adresa predajní:**

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, [predajnatn@insportline.sk](mailto:predajnatn@insportline.sk)
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, [predajnaba@insportline.sk](mailto:predajnaba@insportline.sk)
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, [predajnake@insportline.sk](mailto:predajnake@insportline.sk)

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

#### **Záručné podmienky a záručná doba**

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

#### **Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):**

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

#### **Upozornenie:**

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

#### **Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru**

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR  
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov  
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264  
Telefon: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz  
Web: www.insportline.cz

---

**SK****inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082  
Telefón: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk  
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: