




**POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK**  
**IN 23094 Masážny pás inSPORTline Petulin**

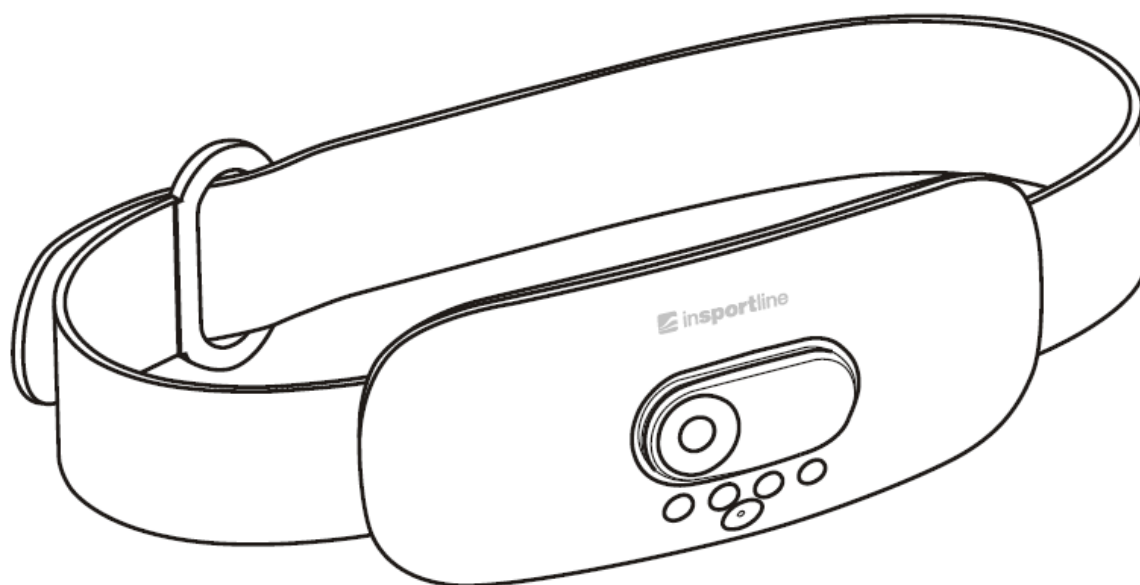


# OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....	3
POPIS PRODUKTU .....	4
OBSAH BALENIA .....	5
POUŽÍVANIE .....	5
DOBÍJANIE .....	6
BATÉRIA .....	6
ÚDRŽBA .....	6
SKLADOVANIE .....	6
FAQ .....	7
ŠPECIFIKÁCIA .....	7
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA .....	8
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE .....	8

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Pre lepší zážitok môžete elektródy navlhčiť vlhkým uterákom.
- Zariadenie neponárajte do vody, nie je vodotesné.
- Ak chcete upraviť polohu zariadenia, najprv ho vypnite. Nikdy nepresúvajte alebo nemeňte polohu prístroja, pokiaľ je v prevádzke.
- Zariadenie nie je hračka. Nie je určené pre deti.
- Ak pociťujete nevoľnosť, prestaňte zariadenie používať a kontaktujte Vášho lekára.
- Pokiaľ zariadenie skladujete po dlhšiu dobu dobíjajte ho aspoň raz za mesiac.
- Počas používania odstráňte všetky šperky a kovové predmety z dosahu prístroja. Elektródy môžu kontaktom s kovovými prístrojmi spôsobiť skrat alebo spôsobiť elektrický šok.
- Nepoužívajte nepretržite na jednom mieste dlhšie ako 30 min.
- Ak ste citlivý na teplo, prístroj nepoužívajte.
- Prístroj nepoužívajte na miestach s vysokou teplotou alebo vysokou vlhkosťou.
- Prístroj nepoužívajte, ak máte akékoľvek ochorenie alebo poranenie pokožky.
- Prístroj nepoužívajte, ak používate akékoľvek zdravotné elektrické zariadenia ako je kardiostimulátor a i.
- Nepoužívajte v blízkosti iných prístrojov, ktoré vyžarujú elektromagnetické alebo vysoko frekvenčné vlny.
- Prístroj neupravujte ani neopravujte sami.
- Skladujte na suchom a dobre vetranom mieste.
- Nekladte na prístroj ťažké veci.
- Prístroj sa automaticky vypne po 15 min používania.
- Prístroj neslúži ako náhrada lekárskej alebo liečebnej starostlivosti.
- Prístroj je určený iba pre domáce používanie, nie je vhodný pre komerčné alebo lekárske účely.
- Produkt nie je vhodný pre osoby mladšie ako 16 rokov.
- VAROVANIE: Prístroj nie je vhodný pre používateľov trpiacich: citlivou pokožkou, vysokým alebo nízkym tlakom, cerebrovaskulárnymi ochoreniami, nádormi, poruchami krvácania, zápalmi alebo iným ochoreniami. Pred používaním sa vždy poraďte s lekárom.

## POPIS PRODUKTU

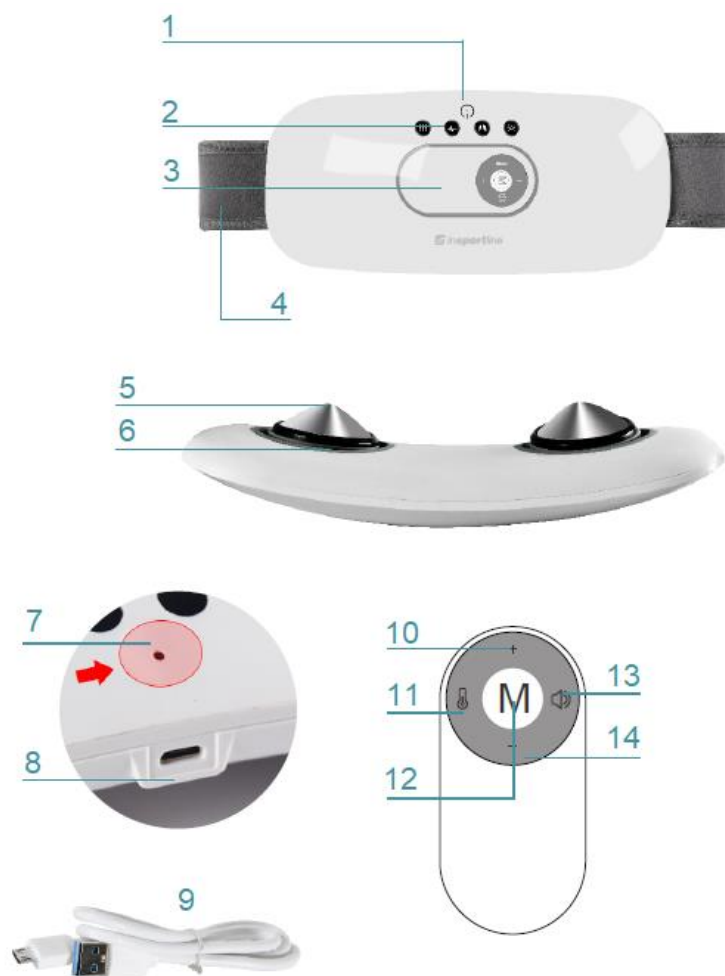


1. Vypínač
2. Displej
3. Ovládač
4. Popruh
5. Elektródy
6. Airbagy
7. Indikátor napájania
8. Nabíjací port
9. USB kábel
10. Zvýšenie intenzity
11. Vyhrievanie
12. Režim
13. Zvuky
14. Zníženie intenzity

## OBSAH BALENIA

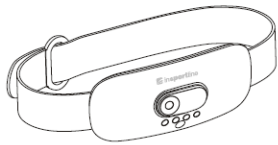

Masážny pás

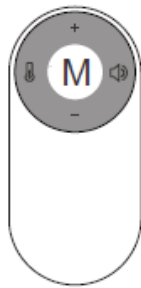

Ovládač



USB nabíjací kábel



Používateľský manuál

## POUŽÍVANIE

**Poznámka:** Pred používaním navlhčite elektródy.



Umiestnite masážny pás na pás a upravte popruh tak, aby bolo pohodlné pás nosiť.



Stlačte tlačidlo M (režim) po dobu 3 sekúnd pre spustenie.



Stlačením tlačidla M zmeníte režim.

Podržte tlačidlo M po dobu 3 sekúnd pre vypnutie.



nastavíte vyhrievanie



nastavíte zvuky



nastavíte intenzitu

## DOBÍJANIE

Pokiaľ je stav batérie nízky, indikátor bude blikať načerveno.

Počas nabíjania indikátor bliká načerveno, po nabití bude indikátor blikať namodro.

Doba nabitia: 2 – 3 hodiny.

Zariadenie je napájané lítiovou batériou. Ak nebudete zariadenie používať dlhšie ako 3 mesiace, dobíjajte pravidelne batériu.



## BATÉRIA

- Ovládač používa gombíkovú batériu CR2032.
- Pokiaľ zariadenie nepoužívate dlhší čas, batériu vyberte.
- Nepoužívajte iné batérie, než je odporúčané.
- Batériu nepoužívajte v prostredí, kde teplota presahuje 45 °C.
- Batériu nehádzajte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ju na miesta určené pre recykláciu.

## ÚDRŽBA

- Pred čistením prístroj vypnite.
- Nečistoty čistite suchou a mäkkou handričkou.
- Elektródy čistite po používaní vlhkým uterákom alebo handričkou. V prípade nečistôt môžete elektródy očistiť dezinfekciou alebo 75% koncentrátom alkoholu a mäkkou handričkou.

## SKLADOVANIE

- Držte mimo dosah detí.
- Držte mimo dosah slnečného žiarenia, vysokých teplôt a vlhkých miest.
- Skladujte na suchom a dobre vetrateľnom mieste.
- Vonkajšia teplota: -20 °C – +55 °C
- Vlhkosť okolia: < 93%
- Tlak: 50 kPa – 106 kPa

## FAQ

Problém	Príčina	Riešenie
Nejde spustiť.	Nízky stav batérie.	Dobite produkt.
Nejde dobiť / indikátor nezobrazuje informácie.	USB kábel nie je správne zapojený.	Zapojte správne kábel.
	USB kábel nie je nabíjací.	Používajte správny USB kábel.
Ovládač nefunguje.	Batéria je slabá.	Vymeňte batériu.
Displej funguje, ale zariadenie nemasíruje.	Elektródy sa nedotýkajú pokožky.	Uistite sa, že sa elektródy dotýkajú pokožky.
	Na pokožke sú nečistoty alebo cudzie predmety.	Vyčistite a osušte pokožku alebo odstráňte cudzie predmety.
Pocit mravčenia	Elektródy sa priamo nedotýkajú pokožky.	Upravte veľkosť tak aby sa elektródy dotýkali pokožky.
	Prevádzka je príliš dlhá.	Čas prevádzky je 15 min.
	Intenzita je vysoká.	Znížte intenzitu.
	Pokožka je príliš citlivá.	Prestaňte produkt používať.
Slabá stimulácia.	Elektródy nie sú priamo v kontakte s pokožkou.	Elektródy sa musia dotýkať pokožky.
	Elektródy sú špinavé.	Očistite elektródy.
	Intenzita je nízka.	Nastavte intenzitu.

## ŠPECIFIKÁCIA

<b>Model</b>	HZ-YBB-1
<b>Rozmer</b>	23 x 10.5 x 9 cm
<b>Batéria ovládača</b>	CR2032, gombíková batéria 3 V DC
<b>Vstavaná batéria</b>	Lítium
<b>Materiál</b>	ABS + silikón
<b>Doba nabitia</b>	2 – 3 hod.
<b>Vstup</b>	5 V
<b>Hmotnosť</b>	400 g ± 10 g
<b>Frekvencia tepu</b>	2 230 Hz ± 10
<b>Šírka vln</b>	448 µS
<b>Automatické vypnutie</b>	15 min
<b>Vlhkosť okolia – používanie</b>	< 80%
<b>Vonkajšia teplota – používanie</b>	+5 °C - +40 °C
<b>Atmosférický tlak - používanie</b>	86 kpa – 106 kpa

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odnesť na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

### Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

### Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, [predajnatn@insportline.sk](mailto:predajnatn@insportline.sk)
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, [predajnaba@insportline.sk](mailto:predajnaba@insportline.sk)
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, [predajnake@insportline.sk](mailto:predajnake@insportline.sk)

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

### Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

**Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):**



- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

### **Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru**

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**CZ**

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: [eshop@insportline.cz](mailto:eshop@insportline.cz)  
[reklamace@insportline.cz](mailto:reklamace@insportline.cz)  
[servis@insportline.cz](mailto:servis@insportline.cz)

Web: [www.inSPORTline.cz](http://www.inSPORTline.cz)

**SK**

**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: [objednavky@insportline.sk](mailto:objednavky@insportline.sk)  
[reklamacie@insportline.sk](mailto:reklamacie@insportline.sk)  
[servis@insportline.sk](mailto:servis@insportline.sk)

Web: [www.inSPORTline.sk](http://www.inSPORTline.sk)