



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 23095 Masážny prístroj inSPORTline Knair




OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
DISPLEJ.....	4
OBSAH BALENIA	5
POUŽÍVANIE	5
REŽIMY.....	5
DOBÍJANIE	5
ÚDRŽBA	6
SKLADOVANIE	6
ŠPECIFIKÁCIA	6
FAQ	6
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	6
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	6

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Pre lepší zážitok môžete elektródy navlhčiť vlhkým uterákom.
- Zariadenie neponárajte do vody, nie je vodotesné.
- Ak chcete upraviť polohu zariadenia, najprv ho vypnite. Nikdy nepresúvajte alebo nemeňte polohu prístroja, pokiaľ je v prevádzke.
- Zariadenie nie je hračka. Nie je určené pre deti.
- Ak pociťujete nevoľnosť, prestaňte zariadenie používať a kontaktujte Vášho lekára.
- Pokiaľ zariadenie skladujete po dlhšiu dobu, dobíjajte ho aspoň raz za mesiac.
- Počas používania odstráňte všetky šperky a kovové predmety z dosahu prístroja. Elektródy môžu kontaktom s kovovými prístrojmi spôsobiť skrat alebo spôsobiť elektrický šok.
- Nepoužívajte nepretržite na jednom mieste dlhšie ako 30 min.
- Ak ste citlivý na teplo, prístroj nepoužívajte.
- Prístroj nepoužívajte na miestach s vysokou teplotou alebo vysokou vlhkosťou.
- Prístroj nepoužívajte, ak máte akékoľvek ochorenie alebo poranenie pokožky.
- Prístroj nepoužívajte, ak používate akékoľvek zdravotné elektrické zariadenia ako je kardiostimulátor a i.
- Nepoužívajte v blízkosti iných prístrojov, ktoré vyžarujú elektromagnetické alebo vysoko frekvenčné vlny.
- Prístroj neupravujte ani neopravujte sami.
- Skladujte na suchom a dobre vetranom mieste.
- Nekladte na prístroj ťažké veci.
- Prístroj sa automaticky vypne po 15 min používania.
- Prístroj neslúži ako náhrada lekárskej alebo liečebnej starostlivosti.
- Prístroj je určený iba pre domáce používanie, nie je vhodný pre komerčné alebo lekárske účely.
- Produkt nie je vhodný pre osoby mladšie ako 16 rokov.
- VAROVANIE: Prístroj nie je vhodný pre používateľov trpiacich: citlivou pokožkou, vysokým alebo nízkym tlakom, cerebrovaskulárnymi ochoreniami, nádormi, poruchami krvácania, zápalmi alebo iným ochoreniami. Pred používaním sa vždy poraďte s lekárom.

POPIS PRODUKTU

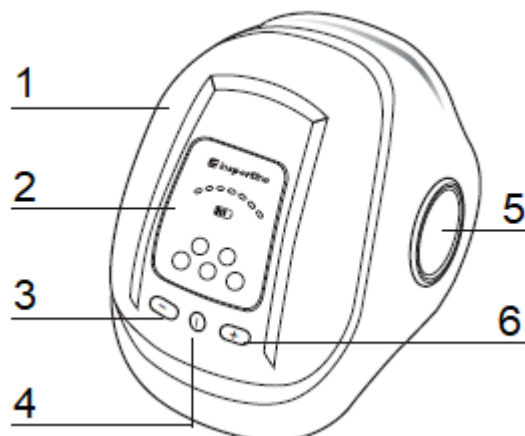

1. Masážny prístroj
2. Displej
3. Zníženie
4. Napájanie / režim
5. Svetlo
6. Zvýšenie

DISPLEJ

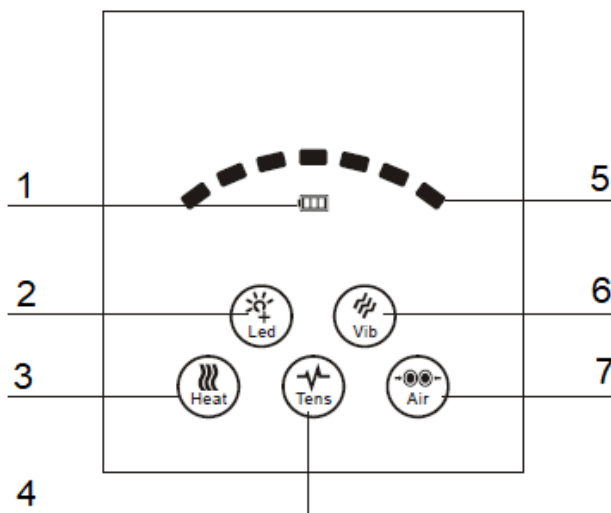

1. Stav batérie
2. Červené svetlo
3. Vyhrievanie
4. Pulzová masáž
5. Intenzita
6. Vibračná masáž
7. Vzduchová masáž

OBSAH BALENIA



Masážny prístroj



Elektródy



USB nabíjací kábel



Manuál

POUŽÍVANIE

1. Nasadte si masážny prístroj na koleno (ovládaci panelom smerom nahor).
2. Stlačením vypínača/režimu prístroj spustíte. Stlačením tlačidla vypínača/režimu prepnete režim.
3. Intenzitu možno nastaviť stlačením + a - v akomkoľvek režime (14 úrovní).
4. Prístroj sa automaticky vypne po 15 min prevádzky.
5. Ak začne indikátor blikať na červeno, je stav batérie nízky, prosím dobite ju.
6. Prístroj nepoužívajte počas nabíjania.

Pokiaľ chcete použiť elektródy, pripojte elektródy do portu a umiestnite elektródy na požadované miesto.

REŽIMY

	Červené svetlo	Vibrácie	Vyhrievanie	Pulzová masáž	Vzduchová masáž
Režim 1	*	*	*	*	*
Režim 2	*		*	*	*
Režim 3	*	*		*	*
Režim 4	*	*	*	*	
Režim 5	*			*	*
Režim 6	*			*	
Režim 7			*		
Režim 8					*

DOBÍJANIE

Pokiaľ je stav batérie nízky, indikátor bude blikať načerveno.

Pripojte nabíjačku do portu.

Počas nabíjania bliká indikátor načerveno, indikátor bude svietiť namodro akonáhle je batéria nabitá.

Nepoužívajte prístroj počas nabíjania.

ÚDRŽBA

- Pred čistením produkt vždy vypnite.
- Nečistoty čistite suchou a mäkkou handričkou.

SKLADOVANIE

- Držte mimo dosah detí.
- Držte mimo dosah slnečného žiarenia, vysokých teplôt a vlhkých miest.
- Skladujte na suchom a dobre vetrateľnom mieste.

ŠPECIFIKÁCIA

Model	HZ-KNEE-2
Materiál	ABS + PMMA
Hmotnosť	745 g
Vstup	5 V 1 A
Napätie	4 W
Čas prevádzky	15 min
Prevádzková teplota	45 °C – 60 °C (±5 °C)
Vonkajšia teplota	5 °C – 40 °C
Vlhkosť	< 80%

FAQ

Problém	Príčina	Riešenie
Nejde spustiť.	Nízky stav batérie.	Nabite zariadenie.
Slabé vibrácie alebo vzduchová masáž.	Nízky stav batérie.	Nabite zariadenie.
Nejde nabiť.	Skontrolujte kábel.	Vyskúšajte nový nabíjací kábel.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov

uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na

domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk