



## **POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK**

**IN 23202 Ošetrujúca LED maska na tvár a krk inSPORTline  
Hilmana**

## OBSAH

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....           | 3 |
| OBSAH BALENIA.....                  | 3 |
| ŠPECIFIKÁCIE .....                  | 3 |
| PRÍNOSY POUŽÍVANIA.....             | 3 |
| POUŽÍVANIE .....                    | 4 |
| EFEKTY LED SVETIEL .....            | 4 |
| OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA .....  | 6 |
| ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE ..... | 6 |

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Nepoužívajte dlhšie ako 20 minút denne.
- Nepoužívajte dlhodobo.
- Produkt nie je hračka, držte mimo dosahu detí.
- Vyhnite sa kontaktu svetiel s očami. Nepozerajte sa do priameho svetla masky. Pri používaní zatvorte oči, ak je svetlo i napriek tomu intenzívne, zakryte si oči bavlnenou handričkou.
- Pre lepší efekt používajte s rutinnou starostlivosťou o pleť.
- Prístroj obsahuje elektrické obvody a LED svetlá. Produkt nesmiete stláčať alebo prekladať.
- Nepoužívajte pred spaním.
- Neponárajte do vody.
- Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá.
- Produkt nevystavujte priamemu slnečnému svitu.
- Produkt nie je vhodný pre: tehotné ženy, osoby trpiace epilepsiou, alergiou na svetlo a teplo, osoby trpiace citlivou pokožkou, dermatologickým ochorením, osoby so zranením alebo jazvami atď.
- **VAROVANIE:** Prístroj neslúži ako náhrada lekárskej alebo liečebnej starostlivosti.

## OBSAH BALENIA

|                 |    |
|-----------------|----|
| LED maska       | 1x |
| Nástavec na krk | 1x |
| Manuál          | 1x |
| Ovládanie       | 1x |
| Napájací kábel  | 1x |
| Elektrody       | 7x |

## ŠPECIFIKÁCIE

|                          |                    |                        |                     |
|--------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Výstupný výkon</b>    | DC 10 V 2 500 mA   | <b>Ovládanie</b>       | Digitálne ovládanie |
| <b>Zdroj svetla</b>      | LED svetlá         | <b>Vstupné napätie</b> | AC 100 – 240 V      |
| <b>Počet LED svetiel</b> | 138 maska + 54 krk | <b>Nastavenie času</b> | 5 - 60 minút        |

## PRÍNOSY POUŽÍVANIA

Pri pravidelnom používaní dochádza ku:

- zlepšeniu kvality a pružnosti pleti,
- odstráneniu akné a nedokonalostí pleti (prípadne pigmentových škvŕn),
- redukcii vrások,
- regenerácii buniek a zrýchleniu metabolizmu tkanív,
- podpore cirkulácie krvi,

- prekrveniu tváre.

## POUŽÍVANIE

- Očistite a jemne si osušte tvár aj krk. Tvár nedrhňte, aby ste nemali podráždenú pokožku.
- Na tvár a krk môžete naniesť kozmetický prípravok pre zlepšenie kvality pleti (LED žiarenie dokáže lepšie vstrebávať prípravky do pokožky).
- Pred nasadením masky si vyskúšajte funkcie ovládača.
- Pokiaľ chcete používať masku aj s elektródami, nasadte ich do vnútornej strany masky (masku môžete používať aj bez elektród).
- Pripevnite si na tvár masku a pripojte k ovládaču pomocou kábla.
- Počas používania nečítajte knihy, nepozerajte sa na televíziu alebo do počítača. Majte oči zatvorené. Odporúčame si sadnú alebo ľahnúť.
- Stlačte tlačidlo pre zmenu farby (Color), vyberte farbu: červenú, modrú, zelenú, fialovú, žltú, svetlo modrú alebo bielu.
- Pomocou dvoch šípok (Time) si nastavíte čas (odporúčame 10 - 20 minút). Začínajte s **KRATŠOU** dobou používania masky.
- Pomocou tlačidla Brightness môžete nastaviť intenzitu svetla. Zo začiatku používania nastavte intenzitu na **NAJNIŽŠIU** a postupne po 3 použitíach intenzitu zvyšujte.
- Tlačidlo Microelectronics slúži pre nastavenie intenzity mikroprúdu, ktorý bude do pokožky privádzaný jemnými pulzmi. Opäť začínajte s najnižším nastavením, ktoré môžete postupne zvyšovať.
- Tlačidlom Flicker spustíte blikanie masky, ktoré slúži k vyššiemu a intenzívnejšiemu účinku svetla. Táto funkcia sa však **neodporúča používať dlhodobo**. Maximálne 1x týždenne po dobu jedného mesiaca.
- Masku môžete používať spoločne s produktmi pre starostlivosť o pokožku. Ak používate masku spoločne s kozmetickými produktmi, odporúčame používať červené LED svetlo a potom masku očistite pomocou vlhkej mäkkej handričky a osušte.
- Masku odporúčame používať denne max 20 minút. Môžete počas jedného dňa vyskúšať niekoľko ošetrení (farieb), ale počkajte medzi nimi aspoň 10 minút.
- Ideálne masku používajte 2x - 3x týždenne.
- Pri dlhodobom pravidelnom používaní sa odporúča masku používať maximálne jeden rok a potom ju mesiac nepoužívať vôbec.

## EFEKTY LED SVETIEL

### Modré svetlo



**Sterilizácia, potláča zápal.**

### Zelené svetlo

**Znižuje mastnotu pokožky.**



**Červené světlo**



Zasvětluje pokožku, vyhladzuje vrásky.

**Svetlomodré světlo**




Zlepšuje metabolismus.

**Fialové světlo**



Redukuje jazvy po akné.


**Žlté světlo**

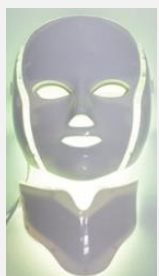

Energetizuje pokožku.

**Biele světlo**

Redukuje pehy.

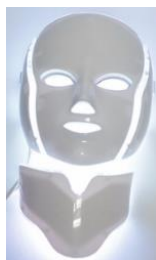

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odnesť na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

### Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

### Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, [predajnatn@insportline.sk](mailto:predajnatn@insportline.sk)
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, [predajnaba@insportline.sk](mailto:predajnaba@insportline.sk)
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, [predajnake@insportline.sk](mailto:predajnake@insportline.sk)

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

### Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

**Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):**

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

### **Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru**

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom

kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**CZ**  
**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: [www.inSPORTline.cz](http://www.inSPORTline.cz)

**SK**  
**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Web: [www.inSPORTline.sk](http://www.inSPORTline.sk)