



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 24988 Ultrasonický kozmetický prístroj inSPORTline
Lovret



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POUŽÍVANIE	3
Čistiaci režim.....	3
Moisturizing režim	4
Lifting režim.....	4
ÚDRŽBA A SKLADOVANIE	5
DOBÍJANIE	5
POPIS PRODUKTU	6
FUNKCIE	6
PARAMETRE	6
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	6
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	7

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Nepoužívajte dlhodobo.
- Produkt nie je hračka, držte mimo dosah detí.
- Vyhnite sa kontaktu s očami.
- Pre lepší efekt používajte s rutinnou starostlivosťou o pleť.
- Nepoužívajte pred spaním.
- Neponárajte do vody.
- Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá.
- Produkt nevystavujte priamemu slnečnému svitu.
- Produkt nie je vhodný pre: tehotné ženy, osoby trpiace epilepsiou, alergiou na svetlo a teplo, osoby trpiace citlivou pokožkou, dermatologickým ochorením, osoby so zranením alebo jazvami atď..
- Nepoužívajte nepretržite dlhšie ako 15 min.
- Odporúčaná frekvencia použitia je raz týždenne.
- **VAROVANIE:** Prístroj neslúži ako náhrada lekárskej alebo terapeutickkej starostlivosti.

POUŽÍVANIE

Režimy:

Cleansing (čistenie)

Čistenie pleti pomocou vysokofrekvenčných ultrazvukových vibrácií, pozitívne ióny dôkladne čistia póry.

Moisturizing (zpracovanie kozmetických prípravkov/hydratácia)

Podpora vstrebávania živín z kozmetických prípravkov. Napomáha k hydratácii, vyživeniu a rozjasneniu pleti.


Lifting (omladenie)

Elektrostimulácia obnovuje elasticitu pleti, pleť spevňuje a vyhladzuje.

Čistiaci režim

1. Podržte vypínač po dobu 2 sekúnd.

2. Potom stlačte tlačidlo vypínača a vyberte režim Cleanse, rozsvieti sa príslušná dióda (obr. 1). Na čistenie pomocou kladných iónov musíte držať oba vodiace prúžky. Pred čistením pomocou prístroja odporúčame pokožku vyčistiť pomocou bežných kozmetických produktov, ktoré bežne používate.

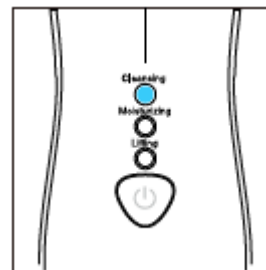

Obr. 1

3. Aplikujte produkty na starostlivosť pokožky.

4. Pohybujte prístrojom ako na obr. 2.




Obr. 2

Moisturizing režim

1. Podržte vypínač po dobu 2 sekúnd.

2. Potom stlačte tlačidlo vypínača a vyberte režim Moisturizing, rozsvieti sa príslušná dióda (obr. 1). Na hydratáciu pomocou záporných iónov musíte držať oba vodiace prúžky. Pred hydratáciou pomocou prístroja odporúčame použiť pleťovú masku.

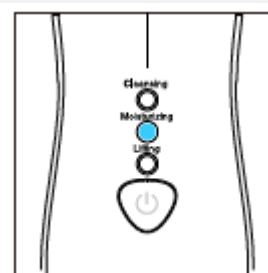

Obr. 1

3. Aplikujte produkty na starostlivosť pokožky.

4. Pohybujte prístrojom ako na obr. 2.




Obr. 2

Lifting režim

1. Podržte vypínač po dobu 2 sekúnd.

2. Potom stlačte tlačidlo vypínača a vyberte režim Lifting, rozsvieti sa príslušná dióda (obr. 1). Pre lifting musíte držať oba vodiace prúžky. Pred liftingom pomocou prístroja odporúčame použiť prípravky na omladenie pleti alebo liftingové krémy na pokožku.

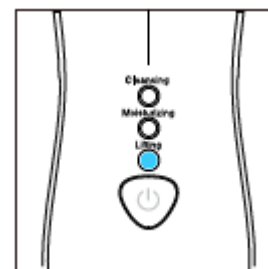

Obr. 1

3. Aplikujte produkty na starostlivosť pokožky.

4. Pohybujte prístrojom ako na obr. 2.




Obr. 2

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE


- Pred akoukoľvek údržbou a skladovaním sa uistite, že je prístroj vypnutý.
- Pomocou vlhkej handričky môžete prístroj očistiť. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.
- Po očistení hlavice prístroja, prístroj uložte na suché miesto.
- Prístroj neskladujte na vlhkých miestach ako sú kúpeľne.
- Skladujte prístroj mimo dosahu detí a zvierat.

DOBÍJANIE


- Pred prvým použitím nabite prístroj a odstráňte ochrannú fóliu.
- Prístroj sa nabíja pomocou USB.
- Zapojte USB do adaptéra pre nabíjanie mobilného telefónu, powerbanky alebo počítača.
- LED dióda bliká počas nabíjania. Pri plnom nabití LED dióda svieti.

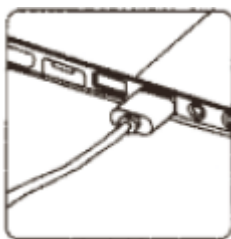

Nabíjanie pomocou počítača

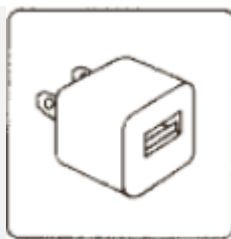

Nabíjanie pomocou adaptéra

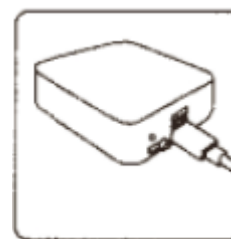

Nabíjanie pomocou powerbanky

- Akonáhle je kapacita batérie nízka, ozve sa zvukový signál a potom sa prístroj vypne.
- Doba nabitia je okolo 2,5 – 3 hodín.

POPIS PRODUKTU



FUNKCIE

- Hĺbkové čistenie a odstránenie odumretej kože.
- Vyblednutie pigmentových škvŕn.
- Proti vráskam, zvyšuje pružnosť pokožky.
- Podporuje krvný obeh a lymfatický systém.
- Zvyšuje schopnosť regenerácie a priepustnosť pokožky.
- Masáž tváre, import živín.

PARAMETRE

Názov	Ultrasonický kozmetický prístroj	Model	IF-1015
Vstupné napätie	DC 5 B	Doba nabíjania	cca 3 hodiny
Výkon	≤ 3 W	Hmotnosť	122 g
Rozmery	175 x 55 x 67 mm	Doba prevádzky	15 min
Batéria	500 mA	Frekvencia používania	Raz týždenne

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadať od miestneho úradu alebo najbližšieho

zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom

- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.inSPORTline.sk