



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK


IN 28768 Nabíjacia silikónová ošetrujúca LED maska inSPORTline Santorina

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Používajte iba za účelom, za akými bol produkt vyrobený.
- Nepoužívajte, ak ste prekonalí akúkoľvek operáciu, úraz tváre alebo ste podstúpili akúkoľvek lekársku / kozmetickú procedúru.
- Pred použitím sa poraďte s lekárom.
- Nepoužívajte, ak ste počas predchádzajúceho použitia pozorovali začervenanie alebo opuch. Pokiaľ začervenanie alebo opuch pretrvá dlhšie ako 2 hodiny, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Ak máte citlivú pokožku, poraďte sa o použití s lekárom.
- Nepoužívajte na otvorené rany.
- Po použití je možná vyššia citlivosť pokožky na slnečné žiarenie.
- Nie je vhodné pre deti.
- Produkt sami neopravujte ani nemodifikujte.
- Nepozerajte sa priamo do svetiel.
- Nepresahujte odporúčanú dobu použitia.
- Ak trpíte nasledujúcimi ochoreniami poraďte sa o použití s lekárom: nádory, zápaly, citlivosť na teplo, citlivosť na svetlo, otvorené rany, krvácanosť, odreniny na pokožke, opuchy, začervenanie pokožky a iné.
- O použití sa poraďte s lekárom, ak ste tehotná.
- Ak pociťujete nevoľnosť alebo nepríjemné pocity okamžite ukončite prevádzku.
- Pred použitím očistite pokožku od kozmetických výrobkov a krémov.
- Nepoužívajte blízko vody alebo nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
- Držte mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa.
- Nepoužívajte, ak je poškodená batéria, nabíjací kábel alebo nabíjačka.
- Používajte a nabíjajte v dobre ventilovanej miestnosti mimo dosahu výbušných plynov.
- Poškodený alebo opotrebovaný produkt nepoužívajte.
- Nenabíjajte dlhšie ako 1 hodinu.
- Chráňte proti nárazom a pádom.
- Počas použitia produkt nezakrývajte.
- Počas nabíjania sa nedá používať.
- Pred umiestnením masky na tvár, otestujte zariadenie na paži.
- **Odporúčaná frekvencia použitia:** 3 – 5x za týždeň, 10 – 20 min

POPIS PRODUKTU

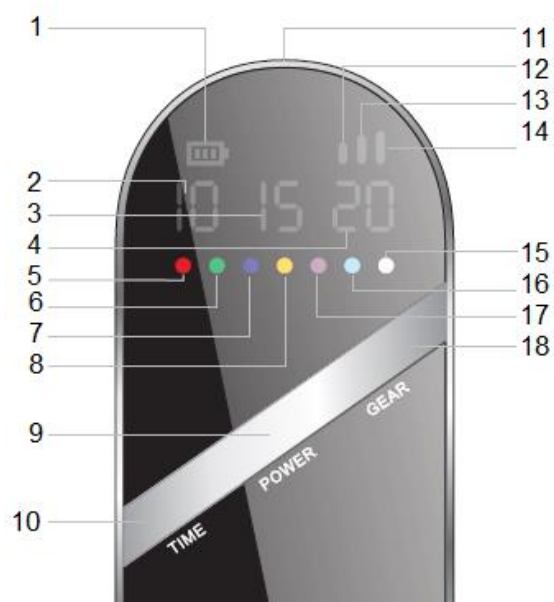

1. Indikátor batérie	10. Čas
2. 10 min	11. Nabíjací port / port výstupu
3. 15 min	12. 1 stupeň
4. 20 min	13. 2 stupeň
5. Červené svetlo	14. 3 stupeň
6. Zelené svetlo	15. Biele svetlo
7. Modré svetlo	16. Svetlomodré svetlo
8. Žlté svetlo	17. Fialové svetlo
9. Tlačidlo napájania / režimu	18. Stupeň

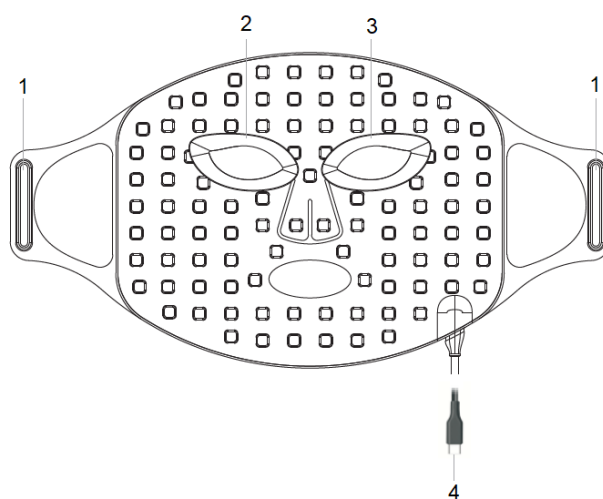

1. Upevnenie popruhu	3. Pravá ochrana oka
2. Ľavá ochrana oka	4. USB-C konektor

POUŽÍVANIE

Pred umiestnením masky na tvár odporúčame otestovať masku umiestnením na ruku.

1. Umiestnite masku na ruku.
2. Stlačením tlačidla POWER masku spustíte, dokončíte 10 min program.
3. Ak pociťujete pálenie alebo nepríjemné pocity okamžite ukončíte prevádzku.
4. Po testovaní počkajte aspoň 6 hodín a pozorujte ošetrené miesto. Ak pozorujete začervenanie, vyrážku, svrbenie alebo iné problémy, masku nepoužívajte.

Frekvencia použitia: 3 – 5 dní týždenne po dobu 10 – 20 min.

Pri prvom použití odporúčame masku používať na 1. – 2. stupni intenzity. Po vybudovaní tolerancie môžete intenzitu navyšovať.

Podľa reakcie pokožky nastavte intenzitu a dĺžku použitia. (Pre modré svetlo by nemala doba použitia prekročiť 10 min.)

Pred použitím je nutné očistiť pokožku od nečistôt, kozmetických výrobkov, krémov, olejov atď. Pred nasadením masky pokožku vysušte.

Umiestnite masku na tvár a zaistite pomocou popruhov. Podržaním tlačidla POWER masku spustíte.

Maska sa spustí na červenom svetle. Stlačením tlačidla POWER prepínate medzi jednotlivými režimami svetla.


Dobu použitia upravíte stlačením tlačidla TIME. Použitie môžete kedykoľvek ukončiť podržaním POWER tlačidla.

Intenzitu môžete upraviť pomocou tlačidla GEAR.


Po odobratí masky môžete aplikovať kozmetické produkty.

Masku očistite pomocou vlhkej handričky, nepoužívajte chemické prostriedky. Pred čistením sa uistite, že je maska vypnutá a nie je zapojená v nabíjačke.


UPEVNENIE MASKY NA TVÁR

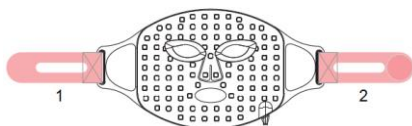

1. ľavý popruh, 2. pravý popruh

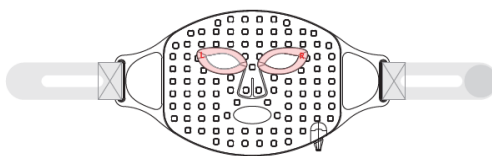

Odoberte kryciu fóliu a pripevnite ľavú a pravú ochranu očí.

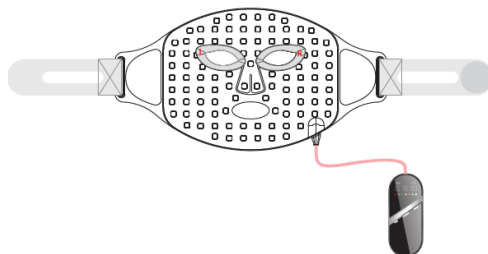

Pripevnite ovládač pomocou USB-C konektora.

TYP OSVETLENIA

Červené svetlo

Stimuluje produkciu kolagénu. Vhodné na opravu tkanív a nahradenie starých tkanív pokožky. Vhodné na zmenšenie pórov.

Zelené svetlo

Pomáha porovnať farbu pigmentu a urýchliť regeneráciu pokožky, znižuje mastnotu.

Modré svetlo

Vhodné na zničenie baktérií a upokojenie pokožky, potláča zápaly.

Žlté svetlo

Dodáva pokožke energiu, redukuje vrásky, porovnáva farbu pigmentu, zlepšuje jemnosť pokožky a iné.

Fialové svetlo

Vhodné pre pleť so sklonom k tvorbe vyrážok.

Svetlomodré svetlo

Podporuje energiu buniek a metabolizmus.

Biele svetlo

Zlepšuje pevnosť pokožky a zrýchľuje metabolizmus tkanív.

ŠPECIFIKÁCIE

LED svetlá	Červené, zelené, modré, žlté, fialové, svetlo modré, biele
Počet svetiel	100 ks
Batéria	1 500 mAh
Napätie	5V / 1A
Výkon	Ca. 6.5 W
Rozmer ovládača	110 x 45 x 22 mm
Rozmer masky	380 x 200 x 3 mm
Časovač	10 / 15 / 20 min
Materiál	ABS + silikón
Obsah balenia	1x LED maska, 1x ovládač, 2x ochrana očí, 2x elastická páska, 1x manuál, 1x nabíjací kábel, 1x skladovací vak

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov

uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,

- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

