



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 29645 Svalový a nervový masážny prístroj inSPORTline Zapster

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Elektródy neodstraňujte z tela, ak je prístroj aktívny.
- Elektródy nikdy neumiestňujte na hlavu.
- Elektródy môžu spôsobiť iritáciu pokožky alebo zvýšiť citlivosť pokožky, a to z dôvodu elektrickej stimulácie alebo použitia vodivého gélu. Pokiaľ tak nastane, okamžite ukončite prevádzku a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Osoby s ochorením srdca alebo epilepsiou, alebo podozrením na dané ochorenie, nesmú produkt používať.
- Elektródy neumiestňujte na: otvorené rany, vyrážky, opuchnuté oblasti, začervenanú pokožku, oblasť trpiacu infekciou, zápaly, kŕčové žily a iné poranenia pokožky.
- Elektródy neumiestňujte na krk, môžu spôsobiť stiahnutie svalov a zhoršiť dýchanie, krvný tlak alebo spôsobiť arytmiu srdca.
- Elektródy neumiestňujte na hrudník, prúd môže spôsobiť arytmiu srdca.
- Elektródy neumiestňujte na oblasti s výskytom nádorov.
- Elektródy neumiestňujte na oblasti s kovovými implantátmi.
- Nepoužívajte počas spánku, riadenia alebo plávania.
- Ak trpíte komplikáciami počas menštruácie alebo ste po pôrode, poraďte sa o použití s lekárom.
- Elektródy neumiestňujte na oblasť, ktorá slúži ako krátkodobá alebo dlhodobá pre vpich injekcií.
- Nepoužívajte, ak ste v poslednom čase prekonali chirurgický zákrok.
- Nepoužívajte, ak trpíte ischemickou chorobou dolných končatín.
- Nie je vhodné pre deti.
- Zariadenie nepoužívajte alebo neprenášajte do oblastí s MRI, CT, prístrojmi využívajúcimi elektromagnetické alebo sonické vlny, cez detektory kovov a podobné oblasti.
- Produkt neupravujte, nemodifikujte ani sami neopravujte.
- Nepoužívajte, ak využívate kardiostimulátor alebo iné elektronické zdravotnícke zariadenie.

- Nepoužívajte v miestnostiach s vysokou vlhkosťou ako sú kúpeľne, sprchové kúty, bazény a iné.
- Elektródy nepoužívajte počas kúpeľa.
- Plochy elektród sa nesmú prekryvať.
- Elektródy neumiestňujte na tepny, chrupavku a kosti.
- Elektródy nepoužívajte v nasledujúcich prípadoch: tehotenstvo, alebo podozrenie na tehotenstvo.
- Elektródy neumiestňujte na šperky, piercingy a iné kovové predmety umiestnené na tele.
- Nepoužívajte v miestnostiach s horľavými alebo výbušnými plynmi.
- Produkt nepoužívajte, ak riadite motorové vozidlo, ťažké stroje alebo pri činnostiach, pri ktorých by náhly sťah svalu mohol ohroziť život.
- Pred použitím sa poraďte s lekárom, ak ste osoby s ochorením srdca, alebo s vyššou citlivosťou na srdcovú arytmiu.
- Pred použitím sa poraďte s lekárom, ak trpíte cukrovou a užívate inzulín.
- Pred použitím sa poraďte s lekárom, ak navštevujete rehabilitačné centrum.
- Pred použitím sa poraďte s lekárom aj vtedy, ak trpíte ochorením alebo úrazom, ktoré nie je vymenované v manuáli.
- Elektródy môžu ovplyvniť alebo zhoršiť príznaky: krvácanosti po nehode, úraze alebo poranení. Môžu ovplyvniť rekonvalescenciu po operačnom zákroku. Menštruáciu.
- Nikdy elektródy neumiestňujte na telo, pokiaľ je prístroj spustený. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pokiaľ chcete elektródy premiestniť, je potrebné prístroj vypnúť.
- Elektródy sa používajú ako pár, nikdy nezapájate elektródy do seba.
- Pokiaľ pociťujete nevoľnosť, bolesť hlavy, prípadne stratu vedomia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Produkt je vhodný na použitie pre zdravé osoby. Produkt je vhodný iba pre dospelé osoby so zdravou pokožkou.
- Pred aplikáciou elektród riadne očistite pokožku od nečistôt a osušte.
- Používajte iba originálne časti alebo ich schválené náhrady. Nekombinujte iné modely alebo typy prístroja.
- Elektróda musí na pokožku priliehať po celej ploche. Elektródy, ktoré nepriliehajú, nepoužívajte.
- Pred použitím skontrolujte vodivý gél elektród. Ak je vyschnutý, elektródu nepoužívajte.
- Začervenanie pokožky po použití je bežné, pokiaľ zmizne do 30 min od použitia. Pokiaľ začervenanie nezmizne do 30 min, elektródy na danú oblasť nepoužívajte, kým začervenanie nezmizne.
- Pre náhradu a kompatibilitu elektród kontaktujte výrobcu.
- Elektródy majú životnosť 20 – 30 použití v závislosti od intenzity použitia, podnebia, skladovania atď..
- Pokiaľ sa po použití objaví dlhodobá iritácia pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Elektródy nahradzte, pokiaľ nelepia, sú poškodené alebo opotrebované.
- Pravidelne kontrolujte oblasť použitia.
- Uistite sa, že elektródy priliehajú k pokožke počas celej doby použitia.
- Zariadenie neslúži ako náhrada profesionálnej lekárskej starostlivosti.
- Vhodné na domáce používanie.



Krehké, chráňte proti fyzickému poškodeniu



Pred používaním si prečítajte manuál



Príložená časť typu B



Produkt nie je možné vytriediť do kontajnerov na triedený odpad, ani do komunálneho odpadu. Nutné odviezť predajcovi alebo odovzdať na ekologickú likvidáciu v rámci obce.


POPIS PRODUKTU

- Veľký podsvietený LCD displej.
- A / B výstupy s rozdielnou intenzitou.
- 3 režimy s programami: **TENS** (P1 – P24), **EMS** (P25 – P48), **Relax** (P49 – P60)

EMS vytvára intenzívne kontrakcie svalov pri tréningu alebo jemné vibrácie pri relaxácii.

TENS je aplikácia elektrického prúdu cez pokožku, ktorá dráždi nervové kmene a vlákna, čo vedie k zmierneniu bolesti.


- Dobíjacia 180 mAh batéria s prevádzkou až 10 hodín na jedno nabitie.
- Nastavenie dĺžky prevádzky: 10 – 60 min, pôvodná hodnota: 20 min.

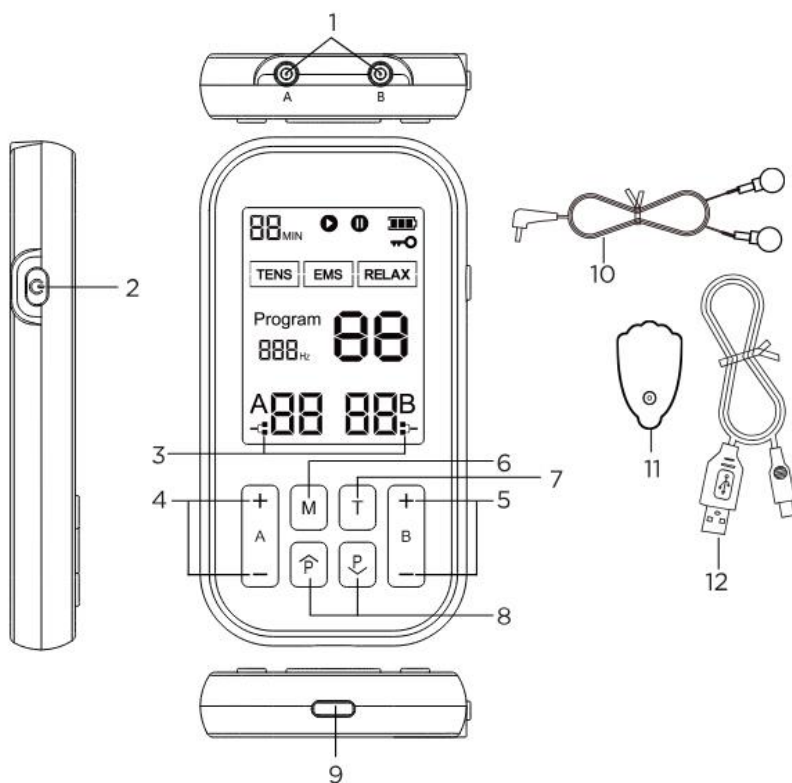


1. Výstup: kanály A/B	5. Úprava intenzity pre kanál B	9. USB-C nabíjací port
2. Vypínač / zámka	6. Výber režimu (TENS/EMS/FITNESS)	10. Pripojovací kábel elektród
3. Ukazovateľ úspešného pripojenia	7. Nastavenie časovača / pauza	11. Elektródy
4. Úprava intenzity pre kanál A	8. Nastavenie programu	12. USB-C kábel

POUŽÍVANIE


1. Zapojte káble do výstupu.

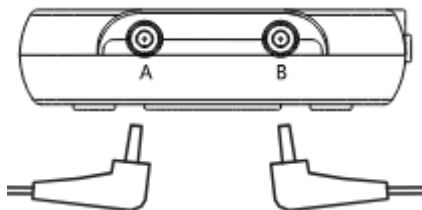


2. Pripojte elektródy a odstráňte ochranný film.

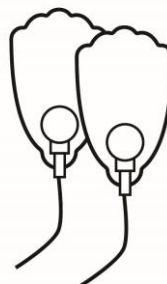

3. Pripevnite elektródy na čistú pokožku.

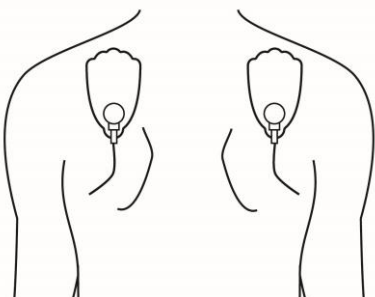


4. Pre spustenie podržte tlačidlo, stlačením zamknete ostatné tlačidlá okrem vypínača.

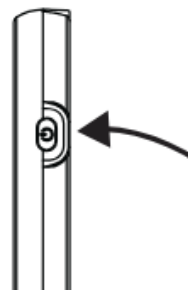


5. Stlačením „M“ vyberte režim.




6. Stlačením $\hat{P}/\downarrow P$ vyberte program.

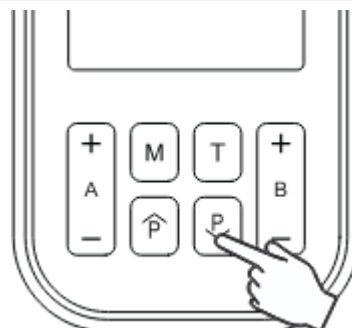

7. Stlačením „+ / -“ upravíte intenzitu pre vybraný kanál.

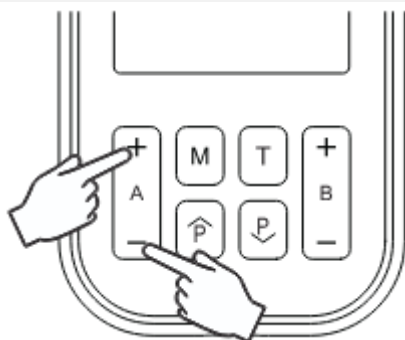

8. Stlačením „T“ zmeníte dĺžku prevádzky. Podržaním pozastavíte a spustíte program.

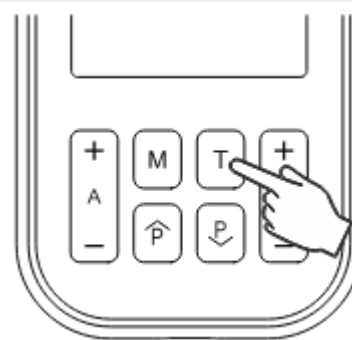

POLOHY ELEKTRÓD

Kanály zariadenia:

Zariadenie má dva nezávislé kanály: Kanál A a Kanál B. Každý kanál môže byť použitý pre:


- Dve rôzne miesta na tele jednej osoby, alebo
- Dvoch rôznych ľudí.

Každý kanál je možné nastaviť na rôzne režimy a úrovne intenzity.


- Čierne/béžové podložky označujú, že sú na rovnakom kanáli.
- Štyri podložky (dve pre každý kanál) môžu pracovať súčasne, ale uistite sa, že podložky rovnakej farby sú umiestnené na jednu osobu, pokiaľ je zariadenie používané pre dve osoby.




Stuhnuté ramená

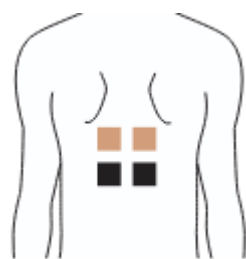


Vzpriamovače trupu

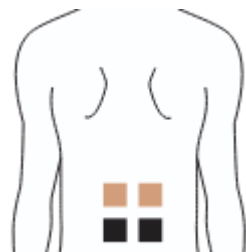


Bedrá

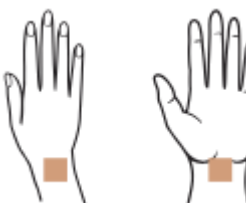


Karpálne tunely

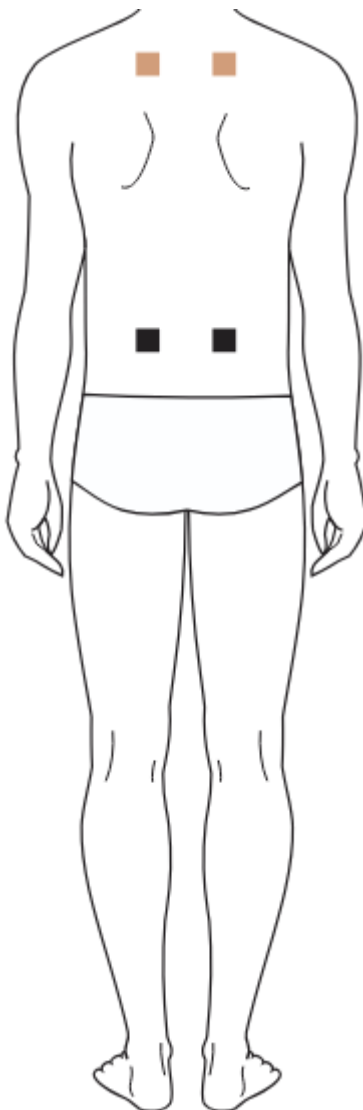

Svaly krku

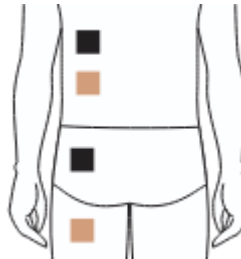

Bedrá

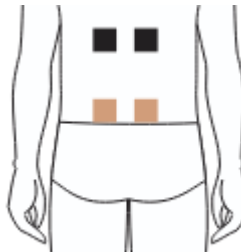

Ischias




Vyskočená platnička



Bolest' ramien



Chronická bolesť bedra

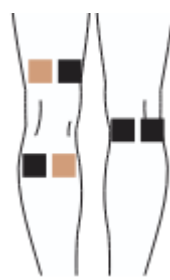

Bolest' kolien



Spodná časť nôh



Bolesť chodidiel



TIPY PRE PRÍPRAVU POKOŽKY

Na zníženie rizika iritácie pokožky, obzvlášť ak trpíte citlivou pokožkou.

- Očistite oblasť použitia pomocou mydla a vody. Mydlo riadne zmyte a pokožku osušte.
- Oblasť utrite obrúskami na prípravu aplikácie.
- Elektródy odnímajte v smere rastu chlpkov.
- Po použití je vhodné na oblasť použitia aplikovať krém.
- Elektródy nikdy neumiestňujte na poškodenú alebo iritovanú pokožku.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- Po použití vypnite zariadenie a odpojte elektródy. Prístroj skladujte na chladnom, suchom a tienistom mieste.
- Na elektródy po použití opäť prilepte ochranné filmy.
- Prístroj dobíjajte aspoň 1x za tri mesiace.
- Elektródy nepoužívajte nepretržite v jednej oblasti dlhšie ako 30 min.
- Prevádzkové podmienky: 5 °C ~ 40 °C, ≤ 80% RH, 700 hPa ~ 1 060 hPa
- Skladovacie podmienky: -20 °C ~ 55 °C, ≤ 93% RH, 700 hPa ~ 1 060 hPa

SKLADOVANIE ELEKTRÓD

- Skladovacia teplota 5 °C ~ 27 °C
- Vlhkosť: 30% ~ 80%

FAQ

Pocit intenzity medzi elektródami je rozdielny.	Bežný jav, rozdielne časti tela reagujú inak.	Nie je potrebná žiadna úprava, len sa uistite, že sú elektródy upevnené po celej dĺžke.
Intenzita je nízka aj na najvyššie nastavenie.	Elektródy nie sú správne upevnené.	Upevnite správne obe elektródy.
	Elektródy nie sú správne upevnené.	Uistite sa, že na elektródach nie je ochranný film.
	Elektródy sa prekrývajú.	Elektródy sa nesmú prekrývať.
	Napájací kábel nie je správne upevnený.	Uistite sa, že je napájací kábel správne upevnený.
	Intenzita sa postupne znižuje.	Telo si zvyká na nastavenú intenzitu, zvýšte výkon.
	Kapacita batérie je nízka.	Nabite batériu.
Pokožka je podráždená alebo začervenaná.	Gélový povrch je vyschnutý alebo znečistený.	Navlhčite končekmi prstov a jemne očistite povrch.
	Nadmerná dĺžka použitia alebo vysoká intenzita.	Skráťte dĺžku použitia alebo znížte intenzitu.
	Elektródy sú opotrebované.	Vymeňte elektródy.
Vybitá batéria, LCD displej sa nespustí.	Vybitá batéria.	Nabite batériu.
Prístroj sa vypne počas použitia.	Vybitá batéria.	Nabite batériu.
	Napájací kábel je poškodený.	Vymeňte kábel.
Elektródu nemožno upevniť.	Ochranný film je stále upevnený na elektróde.	Odoberte ochranný film.
	Mokrú pokožku.	Osušte elektródu a pokožku.
	Gélový povrch je poškodený.	Vymeňte elektródy.
Gélový povrch je poškodený.	Opotrebovaná elektróda.	Vymeňte elektródy.
	Elektróda bola nesprávne skladovaná.	Vymeňte elektródy.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavineníím používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom,

tvarem alebo rozmermi,

- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

