




**POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK**  
**IN 29688 Infračervená LED maska inSPORTline Radora**

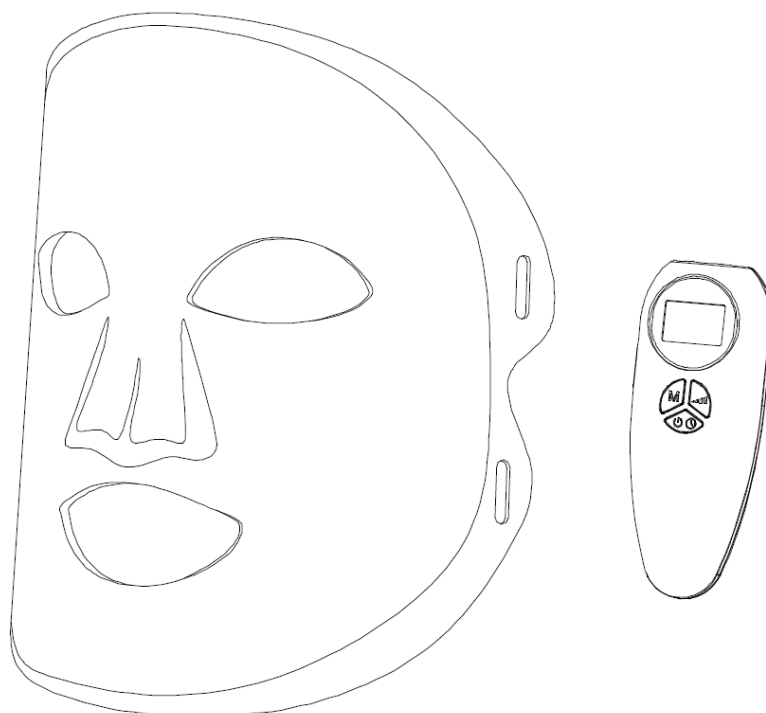

## OBSAH

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....           | 3 |
| ŠPECIFIKÁCIE .....                  | 3 |
| OBSAH BALENIA .....                 | 4 |
| OVLÁDANIE .....                     | 4 |
| NASADENIE MASKY .....               | 6 |
| ÚDRŽBA .....                        | 7 |
| OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA .....  | 7 |
| ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE ..... | 8 |

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku [www.insportline.sk](http://www.insportline.sk), kde nájdete najnovšiu verziu používateľskej príručky.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Používajte iba v súlade s manuálom.
- Nie je vhodné pre tehotné a dojčiace ženy, deti a batolaťatá.
- Nie je vhodné pre osoby citlivé na svetlo, alebo podstupujúce liečbu pokožky. Pred použitím sa poraďte s lekárom.
- Nepoužívajte, ak užívate lieky zvyšujúce citlivosť na svetlo.
- Počas použitia musíte mať nasadené ochranné okuliare, odporúčame zavrieť oči.
- Ak pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte prevádzku.
- Produkt nie je vodoodolný, neponárajte do vody.
- Držte mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte poškodený alebo opotrebovaný produkt.
- Produkt sami neopravujte, nemodifikujte alebo nerozoberajte.

## ŠPECIFIKÁCIE

| Ovládač             |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Nabíjačka           | 5V/1A alebo 5V/2A          |
| Doba nabitia        | 4 hodiny                   |
| Počet použití       | 5x (čas 30 min, L4 úroveň) |
| Batérie             | 3.7V 2 500 mAh             |
| Výstupný výkon      | 5V/2A                      |
| Rozmery             | 123 x 50 x 31 mm           |
| Hmotnosť            | 95 g                       |
| Prevádzková teplota | 0 °C – 45 °C               |
| Skladovacia teplota | -5 °C – 55 °C              |
| Prevádzková vlhkosť | 30% - 95%                  |
| Skladovacia vlhkosť | 20% - 85%                  |

| Maska               |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Výkon               | 5W                            |
| Vlnová dĺžka        | Červená: 630 nm               |
|                     | Modrá: 470 nm                 |
|                     | Žltá: 590 nm                  |
|                     | Infračervené žiarenie: 850 nm |
| Rozmery             | 256 x 209 x 6 mm              |
| Hmotnosť            | 200 g                         |
| Prevádzková teplota | 0 °C – 45° C                  |
| Skladovacia teplota | -5 °C – 55 °C                 |
| Prevádzková vlhkosť | 30% - 95%                     |
| Skladovacia vlhkosť | 20% - 85%                     |


## OBSAH BALENIA

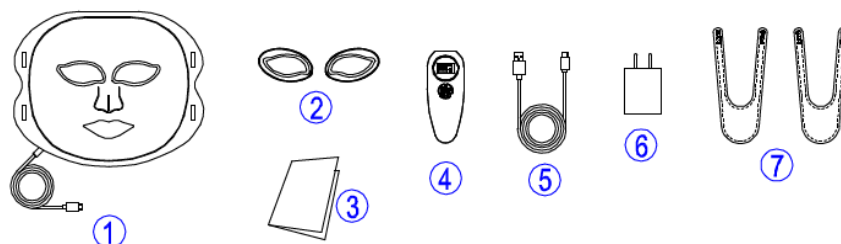

- |                      |
|----------------------|
| 1. LED maska         |
| 2. Ochranné okuliare |
| 3. Manuál            |
| 4. Ovládač           |

- |                                 |
|---------------------------------|
| 5. Nabíjací kábel               |
| 6. Nabíjací adaptér (voliteľné) |
| 7. Popruhy na suchý zips        |

## OVLÁDANIE

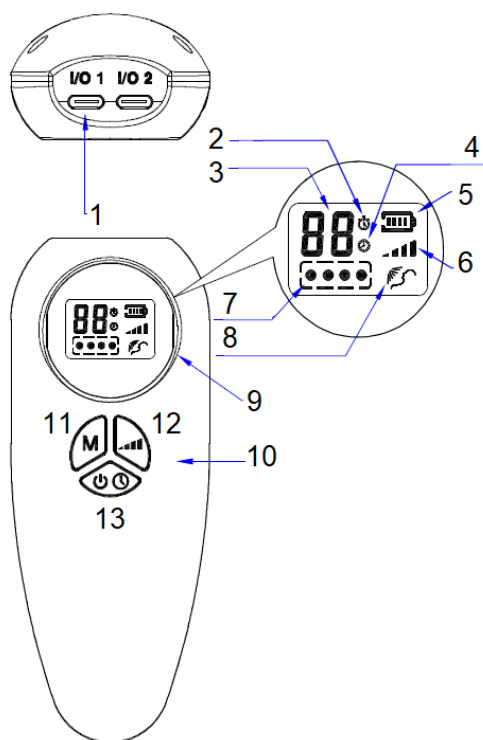

- |                                          |
|------------------------------------------|
| 1. Porty pre zapojenie masky / nabíjania |
| 2. Časovač                               |
| 3. Odpočet času                          |
| 4. Symbol časovača                       |
| 5. Kapacita batérie                      |
| 6. Intenzita                             |
| 7. Režim                                 |
| 8. Dynamické zobrazenie                  |
| 9. LCD displej                           |
| 10. Tlačidlá ovládania                   |
| 11. Zmena režimu                         |
| 12. Nastavenie intenzity                 |
| 13. Vypínač / časovač                    |

### Tlačidlá



**Vypínač / časovač**

Podržaním po dobu 2 sekúnd spustíte / vypnete ovládač. Stlačením nastavíte dĺžku použitia:  
30 min / 25 min / 20 min / 15 min / 10 min / 5 min.



**Režim**

Stlačením prepnete na jeden zo šiestich režimov.



## Intenzita

Stlačením nastavíte na jednu zo štyroch úrovní intenzity.

## Ikony

Batéria

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | 25% kapacita batérie  |
|  | 50% kapacita batérie  |
|  | 75% kapacita batérie  |
|  | 100% kapacita batérie |

Intenzita

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | L1 – najnižšia intenzita |
|  | L2                       |
|  | L3                       |
|  | L4 – najvyššia intenzita |

Režim

Zobrazenie zvoleného režimu.

Časovač

Zobrazenie nastaveného časovača:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 30 <sup>®</sup> | 30 min |
| 25 <sup>®</sup> | 25 min |

## SPUSTENIE

Podržaním vypínača na ovládači spustíte ovládač.

Spustí sa pôvodné nastavenie: 30 min, intenzita L4, 1. režim.

Pre nastavenie času stlačte tlačidlo vypínača / časovača , nastavíte dĺžku použitia. Čas sa nastaví na zobrazenú dĺžku po 3 sekundách neaktivity.

Pre nastavenie režimu, stlačte tlačidlo pre nastavenie režimu . Môžete zvoliť jeden zo šiestich režimov osvetlenia.

Pre nastavenie intenzity, stlačte tlačidlo pre nastavenie intenzity . Môžete zvoliť jednu zo štyroch úrovní.

Ovládač obsahuje ochranu proti nadmernému vybitiu. Ovládač nepretržite kontroluje napätie batérie. Ak klesne pod 3 V, symbol batérie bude blikať po dobu 3 sekúnd a potom sa vypne.

Ovládač obsahuje ochranu proti prepätiu. Počas nabíjania sa zobrazí symbol CH. Batéria sa bude nabíjať, kým napätie nedosiahne 4.2 V. Potom sa nabíjanie zastaví. Po nabití batérie sa zobrazí znak FU.

**Poznámka:**


- Ovládač nenabíjajte počas použitia.
- Pred nabíjaním vypnite ovládač.
- Po dlhšom čase skladovania sa môže ovládač úplne vybiť. Pokiaľ nepôjde spustiť, je potrebné ho nabiť.

**REŽIMY**

|                |        |                                       |                                                                                                                                                  |
|----------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Režim 1</b> | R      | Červené                               | Stimuluje produkciu kolagénu. Vhodné na opravu tkanív a nahradenie starých tkanív pokožky. Vhodné na zmenšenie pórov.                            |
| <b>Režim 2</b> | B      | Modré                                 | Vhodné na zničenie baktérií a upokojenie pokožky, potláča zápal.                                                                                 |
| <b>Režim 3</b> | Y      | Žlté                                  | Dodáva pokožke energiu, redukuje vrásky, porovnáva farbu pigmentu, zlepšuje jemnosť pokožky a i..                                                |
| <b>Režim 4</b> | R+IR   | Červené + Infračervené svetlo         | Podporuje regeneráciu buniek, urýchľuje metabolizmus, rozkladá podkožnú celulitídu, znižuje póry, spevňuje pokožku a zvyšuje elasticitu pokožky. |
| <b>Režim 5</b> | R+Y+IR | Červené + Žlté + Infračervené svetlo  | Odbúrava celulitídu, zosvetľuje chloazmu a pehy, zlepšuje krvný a lymfatický obeh.                                                               |
| <b>Režim 6</b> | R+B+IR | Červené + Modré + Infračervené svetlo | Potláča zápal pokožky a zjemňuje jazvy, podporuje regeneráciu buniek, zlepšuje lymfatický obeh a jemne čistí pleť.                               |

**NASADENIE MASKY****Test citlivosti pokožky**

1. Umiestnite masku na vnútornú stranu paže.
2. Zapojte masku do ovládača a spustíte program po dobu 10 min.
3. Pokiaľ pociťujete teplo alebo nepríjemné pocity, okamžite ukončíte prevádzku.
4. Po teste počkajte po dobu 6 hodín. Pokiaľ sa objaví začervenanie, alebo sa dostaví svrbenie pokožky, produkt nepoužívajte.

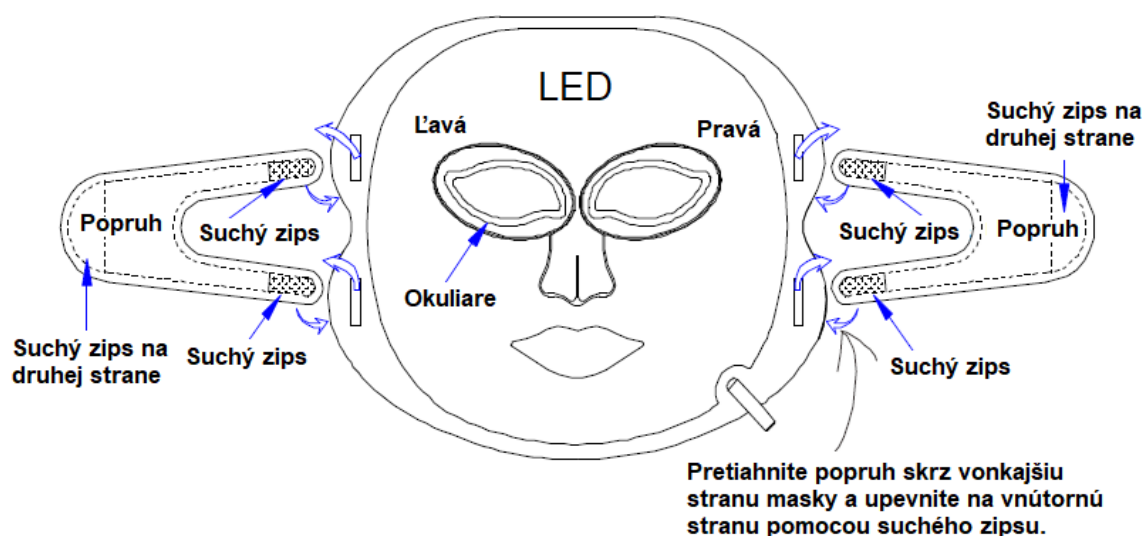

## Krok 1

### Príprava pred nasadením



Očistite pokožku od make-upu a iných kozmetických produktov.  
Očistenú pokožku opláchnite vodou a osušte.

## Krok 2

### Príprava masky a nasadenie masky



Prestrčte ochranné okuliare cez otvory pre oči v maske.  
Umiestnite masku na tvár a utiahnite popruhy so suchým zipsom.  
Zapojte masku do jedného z výstupu ovládača. Nastavte časovač, režim a intenzitu.  
Po použití môže nastať začervenanie po dobu 5 -10 min.

## Krok 3

### Očistite pokožku vodou



Očistite pokožku vodou a aplikujte kozmetické produkty na ochranu pokožky.

## ÚDRŽBA

- Pred čistením vypnite produkt.
- Masku môžete očistiť pomocou vlhkej handričky.
- Viditeľné nečistoty môžete očistiť pomocou roztoku jemného čistiaceho prostriedku. Na dezinfekciu možno použiť 70% roztok izopropylalkoholu. Roztok naneste na masku a nechajte pôsobiť po dobu 1 min. Potom očistite a postup opakujte 3x. Nikdy masku neponárajte do tekutiny, vždy čistite iba navlhčenou handričkou.
- Okuliare čistite rovnakým spôsobom ako masku.
- Po čistení masku osušte a uložte do obalu. Po čistení by maska nemala javiť následky znečistenia alebo vlhkosti.

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

# ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

## Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

## Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, [predajnatn@insportline.sk](mailto:predajnatn@insportline.sk)
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, [predajnaba@insportline.sk](mailto:predajnaba@insportline.sk)
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, [predajnake@insportline.sk](mailto:predajnake@insportline.sk)

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

## Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

## Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

## Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,



- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

#### **Upozornenie:**

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

#### **Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru**

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**CZ**  
**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK**  
**Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317  
DIČ: 2023299729  
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

**Reklamácia tovaru**



**Vrátenie a výmena tovaru**

